



E-One clinic

Gebrauchsanleitung

•One INHALT DER VERPACKUNG	4
VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM GEBRAUCH	6
BEGRIFFE	12
INFORMATIONEN, DIE AM •One BERÜHRUNGSBILDSCHIRM ANGEZEIGT WERDEN	14
EPILATION MIT •One	18
WECHSELN DER OPTIC-KASSETTE	32
OPTIONEN DER SOFTWARE	36
DAS DÜRFEN SIE NIE TUN	40
VERWENDUNG DES ZUBEHÖRS	42
INSTANDHALTUNG	44
TECHNISCHER SUPPORT	46
TECHNISCHE DATEN	48
NORMEN	53
GARANTIEBEDINGUNGEN	54
KONTAKT	55

Liebe Kundin, Lieber Kunde,

wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen in unsere Technologie.

•One Clinic wurde entwickelt, um eine komfortable und sichere Anwendung zu gewährleisten, die zuverlässige und überzeugende Ergebnisse liefert.

•One Clinic, ein fortschrittliches IPL-Home-Treatment zur dauerhaften Haarentfernung, mit unserer patentierten Blitz- und Kühltechnologie im Inneren, kann von der ersten Sitzung an sichtbare Ergebnisse liefern und wird Sie mit glatter Haut an allen behandelten Stellen überraschen.

Wenn Sie weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, sich über unsere Website mit uns in Verbindung zu setzen:
<https://esw-beauty.com/de/kontakt>

Wir möchten Sie auch dazu einladen, uns Ihre Erfahrungen und Ihre Zufriedenheit mitzuteilen, damit wir unsere Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich verbessern können:
(DE) : <https://esw-beauty.com/de/home-de>

Ihr E-Swin-Kundenservice


EOne INHALT DER VERPACKUNG



1 Basis **EOne** und Applikator.




1 **clean** - Optik-Spray.

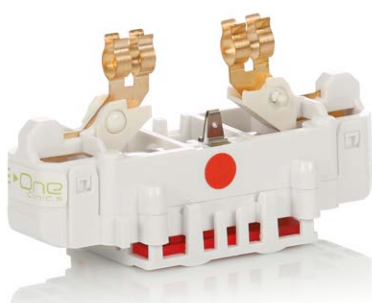


1 **optic** Kassette inkl. Filter - Verbrauchsmaterial (im Applikator Ihres **EOne**).



1 Aktivierungskarte **EOne**

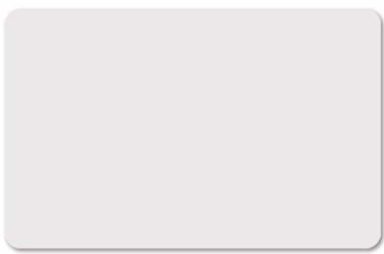

1 **stop** Begrenzungsplatte.

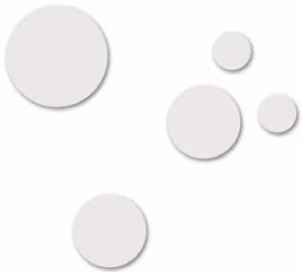

1 **patches** Selbstklebe-Abdeckplättchen



1 **pen** - Stift inkl. Anspitzer.



1 **gel** - Gel für die Lichtimpuls-Anwendung.



1 **mask** - Schutzbrille.



1 Haarentfernungs-Pass



1 Gebrauchsanleitung



1 Netzkabel



ACHTUNG: SIE MÜSSEN ALLE TEILE DER ORIGINALVERPACKUNG SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN (KARTONS, UMPERPACKUNG USW.). Die 2-Jahres-Herstellergarantie (Ersatzteile und Arbeitskraft) wird ausschließlich dann wirksam, wenn das Gerät zusammen mit der vollständigen Originalverpackung zurückgesandt wird. Sie müssen daher alle Verpackungsteile sorgfältig aufbewahren, in denen Ihr **EOne** geliefert wurde.



ZU BEACHTEN: Nur die Gesellschaft E-Swin ist berechtigt, das Gerät **EOne** und das entsprechende Zubehör zu verkaufen: **optic**, **clean**, **patches**, **pen**, **gel**, **mask**, **fun**, usw. und zwar auf ihrer eigenen Firmen-Website www.e-swin.at/shop

Die Herstellergarantie wird in vollem Umfang unwirksam, wenn das Gerät für gewerbliche Zwecke verwendet wird oder wenn **optic** Kassetten in anormal hohen Mengen verbraucht werden. Wenn für ein **EOne** Gerät die Garantie verloren gegangen ist, kann diese nicht zu einem späteren Zeitpunkt wiedererlangt werden.

WARNING: Der Gebrauch des Gerätes **EOne** ist ausschließlich auf den privat-häuslichen Bereich beschränkt; das Gerät darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM GEBRAUCH

I FÜR IHRE SICHERHEIT

Bevor Sie das Gerät **E•One** in Gebrauch nehmen, lesen Sie bitte folgende Informationen aufmerksam durch:

- Spannung: 100 - 240 V~.
- Nenn-Frequenz: 50-60 Hz.
- Maximale Leistungsaufnahme: 240 VA.
- Vergewissern Sie sich, dass diese Spannung mit der in Ihrer Anlage vorhandenen Spannung übereinstimmt. Jeder Fehler beim Anschließen des Geräts **E•One** kann zu irreparablen Schäden führen, die von der Garantie nicht abgedeckt werden.
- Überprüfen Sie die Unversehrtheit und die Funktionstüchtigkeit der Netzsteckdose, an die Ihr **E•One** angeschlossen wird, so dass diese kein Hindernis für die ordnungsgemäße Verwendung Ihres **E•One** bildet (die Netzsteckdose muss leicht zugänglich sein).
- Dieses Gerät ist nur zum privaten häuslichen Gebrauch bestimmt, nicht für gewerbliche Zwecke.
- Zum Abziehen des Netzsteckers nicht am Netzkabel des **E•One** ziehen.
- Berühren Sie das Netzkabel niemals mit feuchten Händen.
- **E•One darf nicht in der Dusche, im Bad oder sonst an einem Platz, wo Wasserspritzer auf das Gerät gelangen können (Applikator oder Basis), verwendet werden.**
- Niemals die Basis des **E•One**, den Applikator oder die **optic**-Kassette in Wasser eintauchen.
- Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn es beschädigt ist, eine funktionale Anomalie aufweist, die am Berührungsbildschirm angezeigt wird, oder nachdem es heruntergefallen ist (es können nicht sichtbare Schäden entstanden sein, die Ihre Sicherheit gefährden).
- Dieses Gerät kann nur mit Hilfe von Spezialwerkzeug repariert werden. Falls nach der Lieferung des **E•One** ein Problem auftritt, kontaktieren Sie uns bitte über unserer Website www.esw-beauty.com.
- **optic**-Kassetten und allgemein alle Zubehörteile müssen ausschließlich über unseren Online-Shop, www.e-swin.at/shop bestellt werden. Wir lehnen jegliche Haftung ab, wenn Verbrauchsmaterial-Kassetten und Zubehör anderer Hersteller verwendet wurden.
- **Bei der Verwendung des Gerätes E•One darauf achten, dass es auf eine ebene Unterlage gestellt wird, und dies an einem Ort, wo nicht das Risiko besteht, dass das Gerät herunter gestoßen wird und zu Boden fällt.**

- E-Swin SAS lehnt jegliche Haftung für eventuell eintretende Schäden ab, die auf eine unsachgemäße Bedienung oder eine Verwendung des Geräts **E•One** zu einem anderen als dem in der Gebrauchsanleitung beschriebenen Zweck zurückzuführen sind.
- Sie erhalten zusammen mit dem Gerät **E•One** eine Schutzbrille (**mask**); diese Brille sollte während der gesamten Zeit der Benutzung des Gerätes getragen werden. Wenn andere Personen sich in der Nähe des eingeschalteten Gerätes aufhalten, dann sollten auch diese die Schutzbrille **mask** tragen.
- Wenn das **E•One** eingeschaltet ist, darf es nicht mit dem Haar, dem von der Schutzbrille **mask** umgrenzten Bereich um die Augen (z.B. Augenbrauen und Wimpern dürfen nie mit geflasht werden), Kleidungsstücken oder anderen Gegenständen in Berührung kommen, um jedes Risiko einer Verletzung, einer Blockierung oder Beschädigung zu vermeiden.
- Das Endstück des Applikators darf im Augenblick des Lichtimpulses die **mask** nicht berühren.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von Aerosolen, nie in der Nähe einer Wärmequelle und auch nie in der Nähe anderer elektronischer Geräte.
- Stellen Sie es nie auf andere elektronische Geräte.
- Ihr Geräte wird mit einem Netzkabel (Länge 2 m) und einem Kabel für den Applikator (Länge 2 m) geliefert. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, auch sonst kein anderes Kabel als die von E-Swin SAS gelieferten; Sie riskieren sonst, dass die elektromagnetische Konformität der Ausrüstung verloren geht.
- Ausrüstungen zur drahtlosen Kommunikation müssen auf Abstand gehalten werden (etwa 3 m), da sie möglicherweise die Funktion des Gerätes stören können.
- Das Gerät **E•One** muss in nicht von elektromagnetischem Smog (durch Computer, elektrische Geräte usw.) belasteten Umgebung installiert werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM GEBRAUCH

VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT IN FOLGENDEN FÄLLEN

- Wenn Sie schwanger sind oder an Diabetes leiden.
- Zur Anwendung bei weißen, grauen oder roten Haaren. Insbesondere bei Personen vom Lichtempfindlichkeitstyp I (rothaariger Typ); es kann zwar im Erwachsenenalter eine Verringerung dieser im Wesentlichen auf Orangepigmenten beruhenden Färbung eintreten. Jedoch bleiben die Melaninstruktur und mit ihr die Eigenschaften dieser Haare erhalten, die Lichttechnologien für die Epilation wirkungslos machen.
- Bei sehr dunkler Haut.
- Bei Vorliegen von Verletzungen, Verbrennungen oder Infektionen der Haut
- **Nach einem Sonnenbrand, dessen Heilung erst weniger als einen Monat zurück liegt.**
- Bei Hautläsionen mit ungewöhnlichem Aussehen müssen Sie den Arzt konsultieren.
- Auf hoch risikobehafteten Hautarealen (Hautunreinheiten, Muttermale, Warzen, noch nicht verheilte Wunden usw.).
- Auf Leberflecken: Wenn diese in der zu behandelnden Hautzone liegen, müssen sie zuerst abgedeckt werden; dies erfolgt mit den Selbstklebe-Abdeckplättchen **patches**, die zusammen mit Ihrem Gerät geliefert werden.
- Auf tätowierten Hautarealen: Permanent-Make-up (z.B. Lippen-Tattoos) oder kosmetische Tattoos, unabhängig von deren Farbe. In diesem Fall verwenden Sie die **stop**-Abgrenzungsplatte, die zusammen mit Ihrem Gerät geliefert wurde.
- Wenn Sie unter einer Hauterkrankung leiden (Ekzem, Entzündung, Akne usw.) leiden.
- Wenn Sie Medikamente nehmen, die Lichtempfindlichkeit verursachen können (bitte fragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden).
- Bei zurückliegenden Hauterkrankungen müssen Sie ein ärztliches Gutachten einholen, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Das Gerät darf nicht zur Anwendung bei Tieren verwendet werden.

FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN

- Jede Verwendung des **E•One** durch Minderjährige bedarf unbedingt der Aufsicht eines Erwachsenen.
- Bewahren Sie das **E•One** nach jeder Verwendung an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf. Ziehen Sie das Stromkabel ab und legen Sie es in seine Originalhülle, wickeln Sie das Applikatorkabel um die dafür mitgelieferten Kabelhalterungen des Applikators.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEZÜGLICH UV-LICHT

SONNENSTUDIOS/SONNENBÄDER ODER KÜNSTLICHE UV-STRAHLEN IN SCHÖNHEITSSALONS:

Bei der Anwendung von UV-Strahlen ist Vorsicht geboten.

Angesichts des hohen UV-Strahlungsdrucks, der von den Maschinen mit hoher Leistungsaufnahme erzeugt wird, ist es ratsam; einige Tage Abstand zwischen einer UV-Behandlung und der Anwendung mit **E•One** einzulegen.

NATÜRLICHE UV-STRAHLUNG:

Wenn Sie nach einer Anwendungssitzung mit dem **E•One** Sonnenstrahlen ausgesetzt sind, müssen Sie danach unbedingt noch 2 Wochen lang ein Sonnenschutzmittel mit sehr hohem Schutzfaktor auf den behandelten Hautarealen anwenden.

SELBSTBRÄUNUNGSMITTEL

Wenden Sie das Gerät nicht an, wenn Sie ein Selbstbräunungsmittel auf dem zu behandelnden Hautareal angewendet haben; warten Sie ab, bis die Wirkung des Selbstbräunungsmittels vollständig verschwunden ist, bevor Sie das Gerät **E•One** anwenden.



VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM GEBRAUCH

I MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN DER ANWENDUNG DES E►One

Wenn das Gerät ordnungsgemäß verwendet wird, ist das Risiko von unerwünschten Nebenwirkungen wie Hautausschlägen oder Verbrennungen äußerst gering, es ist jedoch vorhanden. Wenn solche Wirkungen auftreten, müssen Sie sofort die Anwendung mit dem Gerät abbrechen.

Eine einfache Lösung besteht darin, das Gerät zunächst auf einem kleinen Hautareal zu testen, bevor man eine komplette Anwendungssitzung durchführt. Wenn dabei keine Hautreaktion eintritt, kann das Gerät vollkommen problemlos angewendet werden.

Wenn Sie bei der Anwendung Ihres Epiliergeräts die gegebenen Anweisungen befolgen, sind Nebenwirkungen und Komplikationen wenig wahrscheinlich. Jedoch bergen alle Kosmetik-Anwendungen, auch solche, die für den Hausgebrauch bestimmt sind, gewisse Risiken. Darum ist es wichtig, diese Risiken und möglichen Komplikationen zu verstehen und zu akzeptieren, wenn man ein Epilationssystem auf der Basis von gepulstem Licht für den Hausgebrauch verwenden will.

I EINSATZBEREICH DES E►One

Das von E-Swin entwickelte und hergestellte Gerät ist ein Medizinprodukt der Klasse IIa laut Verordnung und trägt dieser Verordnung gemäß die Kennzeichnung CE 0197.

Das Gerät kann für folgende Anwendungen eingesetzt werden:

- Behandlung von übermäßigem Haarwuchs im Zusammenhang mit hormonell oder idiopathisch bedingtem Hirsutismus.
- Epilationsanwendung zu rein kosmetischen Zwecken an allen Hautarealen außerhalb der Augenregion



I DIE BASIS



I THE APPLICATOR



INFORMATIONEN, DIE AM BERÜHRUNGSBILDSCHIRM DES E•One ANGEZEIGT WERDEN

EIN-/AUSSCHALTEN DES GERÄTS

- 1 Ein/Aus-Schalter.

DIE BASIS DES E•One IST MIT EINEM TOUCHSCREEN-BILDSCHIRM AUSGERÜSTET

SICHERHEITSTECHNISCHE SYMBOLE

- 2 Es muss streng darauf geachtet werden, dass kein Wasser auf irgendeinen Teil des Geräts gelangt.
- 3 Das Gerät E•One darf unter bestimmten physiologischen oder medizinischen Bedingungen nicht angewendet werden (Schwangerschaft, Hautlichtempfindlichkeit durch Medikamente usw.).
- 4 Bevor Sie das Gerät E•One in Gebrauch nehmen, müssen Sie unbedingt diese Gebrauchsanleitung durchlesen.
- 5 Die Schutzbrille (mask) sollte getragen werden..

EINSTELLUNGEN FÜR EPILATIONSANWENDUNG

- 6 Symbol Silhouette Mann/Frau. Hier können Sie auf "Frau" oder "Mann" einstellen.
- 7 Haardicke. Hier können Sie die Haardicke eingeben, von der dünnsten (unten) bis zur dicksten (oben).
- 8 Hautfarbe. Hier können Sie die Hautfarbe eingeben, von der hellsten (unten) bis zur dunkelsten (oben).
- 9 Intensitätsstufe. Das Pegel-Symbol entspricht 6 Intensitätsstufen des ausgehenden Lichtimpulses. Anhand der Pfeile neben dem Pegelsymbol kann die Intensität des Lichtimpulses mehr oder weniger stark eingestellt werden.
- 10 Pause. Dieser Knopf wird während der Epilationsanwendung durchgehend auf dem Berührungsbildschirm angezeigt. Durch Drücken des Knopfes wird das Gerät auf Pausen-Modus gestellt.
- 11 Play. Durch Drücken wird der Pausen-Modus aufgehoben, und die Epilationsanwendung geht weiter.



NAVIGATIONSBEREICH

- 12 Anhand der Pfeiltasten-Symbole ist es möglich, sich von einer Ziffernposition zur anderen zu bewegen (22) sowie niedrigere bzw. höhere Ziffern einzugeben.
- 13 Zurückblättern zum vorherigen Menü. Anhand dieses Symbols kann jegliche zuvor gemachte Auswahl geändert werden. Diese Funktion steht nur dann zur Verfügung, wenn vorher die Symbole 16 und 20 angewählt wurden
- 14 Bestätigen der Eingabedaten 22.

ECHTZEIT-INFORMATIONEN

- 15 Lautstärke aktivieren / deaktivieren.
- 16 Sperren/Entsperren. Anhand dieses Symbols kann Ihr E•One mit einem PIN-Code abgesichert werden.
- 17 Warnung. Wenn dieses Symbol aktiviert ist, wird auf dem Berührungsbildschirm eine Nummer angezeigt, die einer Fehler-Meldung entspricht (siehe Seite 48).
- 18 Erkennen der Aktivierungskarte.
- 19 Temperatur des Applikators. Dieses Symbol ist während des normalen Gerätebetriebs nicht aktiv. Sollte es blinken, bitte die entsprechende Fehlermeldung einsehen (Seite 48).
- 20 Kassetten-Röhre. Wenn das Symbol blinkt, heißt dies, dass Sie den Lichtimpuls einsetzen können. (betrifft nicht diese Ausführung des E•One).
- 21 Das Pegel-Symbol entspricht 6 Intensitätsstufen des ausgehenden Lichtimpulses. Anhand der Pfeile neben dem Pegelsymbol kann die Intensität des Lichtimpulses mehr oder weniger stark eingestellt werden.
- 22 Am Ziffern-Display können Sie den PIN-Code zum Absichern des Gerätes eingeben sowie die zu jedem Zeitpunkt noch verbleibende Anzahl der Lichtimpulse ablesen.




VOR JEDEM GEBRAUCH

ÜBERPRÜFEN

- **Überprüfen Sie das Anschlusskabel** (es darf weder geknickt noch gequetscht sein, und der Draht darf nicht offen liegen).
- **Überprüfen Sie das Verbindungskabel zwischen Gerätebasis und Applikator** (Kabelummantelung nicht defekt)
- **Überprüfen Sie die externen Optik-Komponenten des Gerätes.**
- **Überprüfen Sie, ob die Glaskomponenten am vorderen Teil des Applikators** (Lichtführung) unbeschädigt sind, und falls nicht (Lichtführung zer- oder abgebrochen) muss der gesamte bewegliche Kopf ausgetauscht werden. Es ist möglich, dieses Teil unter in unserem Onlineshop unter www.e-swin.at/shop zu bestellen.
- **Überprüfen Sie die internen Optik-Komponenten.**
 - In jedem Fall müssen Sie den Netzstecker des Gerätes ziehen (Stromversorgung unterbrechen), bevor Sie damit beginnen, den beweglichen Kopf abzumontieren.
 - Vor jedem Gebrauch und vor dem Anstecken des Gerätes an die Netzstromversorgung müssen Sie den Zustand der internen optischen Komponenten überprüfen: Röhre, Filter (flaches, rot eingefärbtes Glasteil) und Lichtleiter. Der Filter muss prinzipiell vor jeder Epilationsanwendung mit dem E•One gereinigt werden. Er muss sauber und staubfrei sein.


So werden die Teile überprüft :

- Gleichzeitig die 2 seitlichen Haltestifte am beweglichen Kopf drücken und diesen herausziehen (1).
- Den beweglichen Kopf vorsichtig auf einer ebenen Fläche ablegen.

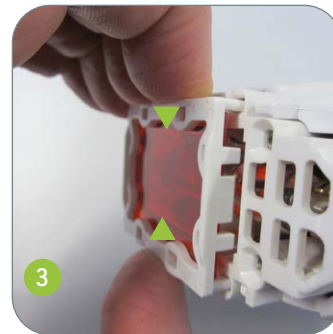

• Entfernen der optic-Kassette mit Filter.

- Nachdem der bewegliche Kopf entfernt wurde, ist im Applikator die optic-Kassette mit dem Filter sichtbar (2).
- Nehmen Sie die optic-Kassette aus dem Applikator: drücken Sie fest auf die Filterhalterung (3) und ziehen Sie an der Kassette (4). Die optic-Kassette mit Filter lässt sich herausnehmen (5) es ist wichtig, sie nur an den Kunststoffteilen zu fassen.

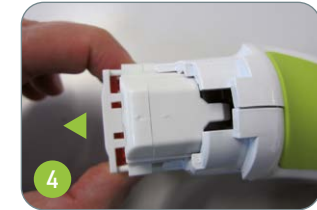


• Reinigen der internen Optik-Komponenten.

- Nach dem Herausnehmen des Filters- haben Sie Zugang zum durchsichtigen Optik-Glas (6).
- Verwendung des clean-Sprays: sprühen Sie es zunächst auf ein nicht faserndes Tuch (7).




ACHTUNG: Nie direkt auf die optischen Komponenten sprühen.

Reinigen Sie danach nur die zugängliche Seite des Filters mit diesem Tuch (8). Wiederholen Sie den Vorgang am zugänglichen Teil des Optik-Glases (9).

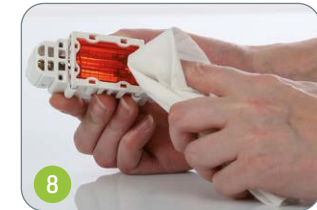

ACHTUNG: Der Filter darf nie von der optic-Kassette getrennt werden.

- Nach der vollständigen Reinigung führen Sie die optic-Kassette wieder in den Applikator ein; dabei achten Sie darauf, dass die kleinen roten Punkte aufeinander treffen (10). Schieben Sie sie in die beidseitige Gleitführung des Applikators und drücken sie (11) bis sie in der richtigen Position einrastet (12).
- Setzen Sie den beweglichen Kopf des Applikators wieder auf, indem Sie gleichzeitig auf die Sperr-Stifte drücken (13). Achten Sie dabei darauf, dass die roten Punkte innen am Kopf mit den roten Punkte auf dem Applikator aufeinander treffen.

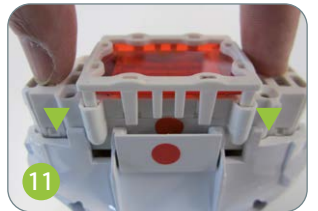

Nach einer Anwendung müssen Sie warten, bis der Ventilator des Applikators komplett zum Stillstand kommt (dies kann bis zu 10 Min. dauern); erst dann das Gerät ausschalten und den Stecker ziehen. Dies ermöglicht, dass die internen optischen Komponenten abkühlen können. Die anderen Ventilatoren in der Basis hören erst auf zu laufen, nachdem der Netzstecker des Gerätes gezogen ist.

ACHTUNG: Um eine höhere Effizienz des E•One zu erreichen, wird empfohlen, vor jedem Gebrauch den Filter mit dem clean-Spray zu reinigen, das beim Kauf des E•One mit geliefert wurde. Filter, die aufgrund der Nichteinhaltung der Gebrauchsanweisung beschädigt wurden, fallen nicht unter die Herstellergarantie.

SCHRITT 1

DEN BESTEN ZEITPUNKT FÜR DIE ANWENDUNG MIT E•One WÄHLEN

Ihre Epilationsmethode vor E-one war:

Rasieren:

Sie können E•One ab sofort benutzen.

Enthaarungscreme:

Benutzen Sie E•One erst, wenn 1 Woche nach der letzten Verwendung der Enthaarungscreme vergangen ist.

Wachs, Elektro-Epiliergerät, Pinzetten:

Benutzen Sie E•One erst, wenn 3 Wochen nach Ihrer letzten Behandlung mit diesen Methoden vergangen sind.

Lasertechnologie, Lichtblitzlampe oder andere Methoden:

Benutzen Sie E•One erst, wenn der Haarwuchs wieder angefangen hat.

SCHRITT 2

DIE HAUT VORBEREITEN

- Ihre Haut sollte sauber, trocken und frei von Kosmetika sein.
- Tragen Sie keine Creme, Feuchtigkeitscreme, Öl oder andere Substanzen auf.
- Rasieren Sie die Hautareale am selben Tag, an dem sie mit dem E•One behandelt werden sollen.

ACHTUNG: Es ist wichtig, dass die Hautbereiche, die mit Pulslicht behandelt werden sollen, ganz einwandfrei durch Rasieren enthaart werden (und nicht durch Wachs, Enthaarungscreme, elektrische Epiliergeräte oder andere Behandlungsmethoden). Rasiert wird am besten auf feuchter Haut, damit die Aggressivität der Rasierklinge gemindert wird.

- Spülen Sie die Haut mit Wasser ab.

SCHRITT 3

VERWENDUNG DER AKTIVIERUNGSKARTE

Das Gerät wird mit einer Aktivierungskarte in Betrieb genommen, die mit 3000 Lichtimpulsen ausgestattet ist. Diese Karte ist spezifisch für die **optic**-Kassette, mit der zusammen sie geliefert wurde.

- Verwenden Sie die Aktivierungskarte, die zu Ihrer **optic**-Kassette gehört.
- Stecken Sie die Karte an der obere Halterungsklemme ein, die sich an der Basis des Applikators befindet.
- Lassen Sie die Karte dort während der gesamten Anwendungssitzung stecken.
- Zu Ende der Anwendung nehmen Sie die Aktivierungskarte heraus, schützen Sie sie vor jeglicher Beschädigung und bewahren sie in ihrem Etui auf.



SCHRITT 4

STARTEN UND EINSTELLEN IHRES E•One

- **Schließen Sie das Gerät mit dem dazugehörigen Netzkabel an die Stromversorgung an.**

E•One sendet 3 Signaltöne aus; der Bildschirm bleibt schwarz (Bildschirm A) Drücken Sie an einer beliebigen Stelle auf den Bildschirm, dann zeigt er alle Symbole an (Bildschirm B).

Die Symbole werden auf den Seiten 14 und 15 erklärt. Die Menüs werden vorübergehend angezeigt.

Nur die sicherheitstechnischen Symbole bleiben dauernd blinkend angezeigt.

- **Entsperren Sie die Sicherheitsfunktionen (Bildschirm C).**


Die Sicherheits-Symbole müssen nacheinander zur Bestätigung gedrückt werden (wobei die Reihenfolge, in der das geschieht, gleichgültig ist).

Wenn alle sicherheitstechnischen Symbole validiert sind, sind die anderen Einstell-Symbole verfügbar.

Falls ein Symbol nicht validiert worden ist, wird es weiter blinken. Solange Sie nicht alle sicherheitstechnischen Symbole bestätigt und darauf gedrückt haben, können Sie nicht mit den Einstellungen fortfahren und Ihr E•One be-nutzen.

- **Einstellen Ihrer Epilationssitzung.**

Zum Einstellen Ihrer Anwendung genügt es, an jedem blinkenden Symbol einige Informationen einzugeben. Sie brauchen nicht auf das Validierungssymbol zu drücken, um die einzelnen Symbole auszuwählen (14). Es müssen alle Einstellungen gedrückt werden, damit E•One benutzt werden kann. Wenn ein Symbol nicht gewählt wurde, blinkt es weiter.

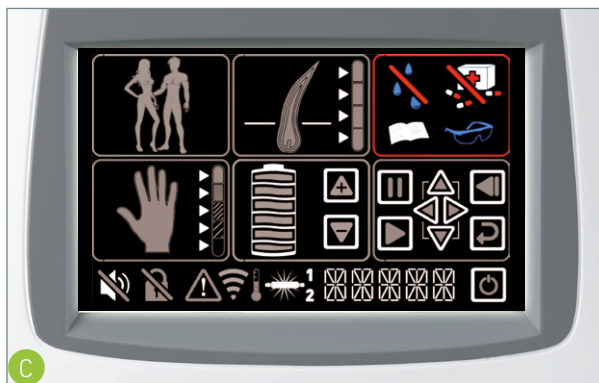

IHRE SILHOUETTE EINSTELLEN (Bildschirm D)

Wählen Sie die Silhouette Mann/Frau durch Drücken auf den Rahmen, woraufhin die Silhouetten-Symbole abwechselnd angezeigt werden (6).



DIE HAARDICKE DER ZU ENTFERNENDEN HAARE EINSTELLEN (Bildschirm E)

Wählen Sie die Haardicke (7) unter 4 zur Verfügung stehenden Haardicke-Stufen aus, vom dünnsten (unten) bis zum bis zum dicksten Haar (oben).



DIE HAUTFARBE EINSTELLEN (Bildschirm F)

Wählen Sie die Hautfarbe (8), zwischen der hellsten (unten) und der dunkelsten (oben).



ACHTUNG: Die Hautfarben sehr dunkel und schwarz stehen nicht zur Auswahl, da E•One in diesen Fällen wegen Inkompatibilität nicht verwendet werden kann.

HAARENTFERNUNG MIT E•One

EINSTELLEN DER GEWÜNSCHTEN INTENSITÄTSSTUFE: (Bildschirm G)


Mit Hilfe der Pfeile neben dem Symbol für die Intensität (9) können Sie die Stärke des ausgesendeten Lichtimpulses höher oder niedriger einstellen.

Klicken Sie auf einen der zwei blauen Pfeile, bis Sie nach und nach den gewünschten Wert für die Stärke des Lichtimpulses erreicht haben.

Wenn die letzte Einstellung bestätigt ist, wird das Pausen-Symbol (10) sichtbar, das im Navigationsbereich angezeigt wird.

Das Lampen-Symbol (20) blinkt; das bedeutet, dass das Gerät einsatzbereit ist und Lichtimpulse aussenden kann.

Sie können jederzeit jede dieser Einstellungen ändern; dazu genügt es, das entsprechende Symbol anzuklicken und dann die Einstellungen zu ändern.

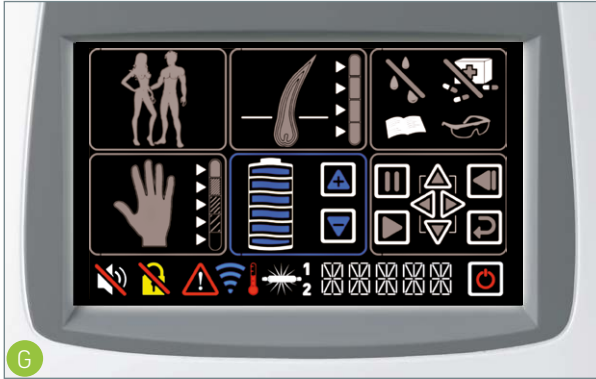

G

ACHTUNG: In der Standardeinstellung ist die Stärke des Lichtimpulses auf die niedrigste Stufe eingestellt. Diese Stufe erlaubt für die Mehrzahl der Nutzer gute Ergebnisse bei optimaler Sicherheit in 100% der Fälle. Eine Erhöhung der Intensitätsstufe des Lichtimpulses des Gerätes bewirkt Folgendes:

- Eine Erhöhung der erreichten Ergebnisse.
- Eine Verringerung der Zahl der für ein dauerhaftes Ergebnis notwendigen Anwendungssitzungen.
- Eine stärkere Wahrnehmung auf der Haut, wenn der Lichtimpuls ausgesendet wird.
- Ein höheres Risiko von Hautreizungen, Hautausschlägen und sogar Verbrennungen auf stark pigmentierter Haut (olivfarbene Haut) im Anschluss an eine Anwendungssitzung.

IN DER PRAXIS: Führen Sie zuerst immer einen Test mit der Grundeinstellung (von E•One vorgeschlagene Standardeinstellung) durch, dann steigern Sie die Intensität um jeweils einen Teilstrich, bis Sie die gewünschte Stärke des Lichtimpulses erreichen. Senden Sie einen Lichtimpuls aus und lassen Sie ihn wirken, warten Sie 5 Minuten lang, um dann die Hautreaktion zu beurteilen. Wenn keine besondere Hautreaktion erfolgt, können Sie das gesamte zur Anwendung vorgesehene Areal mit Lichtimpulsen behandeln oder die Intensität noch um einen weiteren Teilstrich erhöhen und wiederum die Hautreaktion beobachten (und so weiter).

FALLBEISPIELE

BILDSCHIRM H

“Ich bin ein Mann, ich habe weiße Haut, ich möchte meine Achselhaare entfernen”.

Also wähle ich folgende Einstellungen:

- Mann.
- Helle Haut (1.Farbe).
- Die dicksten Haare (4.Haardicke).
- Intensitätsstufenanzeige (Stufe 1).



H

BILDSCHIRM I

“Ich bin eine Frau, ich habe dunkle Haut, ich möchte die Haare an meinen Armen entfernen”.

Also wähle ich folgende Einstellungen:

- Frau.
- Die dunkelste Hautfarbe (5.Farbe).
- Haardicke (2.Haardicke).
- Intensitätsstufenanzeige (Stufe 1).




I

I SCHRITT 5

DIE HAUTZONE FÜR DIE LICHTIMPULS-ANWENDUNG MARKIEREN

- Markieren Sie die Hautzonen, die behandelt werden sollen, mit dem **pen**-Markierungsstift durch Schraffierung (parallele weiße Linien) auf großen Arealen.
- Falls notwendig, benutzen Sie die **stop**-Begrenzungsplatte, um ein größeres Hautareal abzudecken, das nicht mit Lichtimpuls behandelt werden soll (Tätowierungen usw.).
- Um kleinere Zonen abzudecken, die nicht behandelt werden sollen (Leberflecke usw.), verwenden Sie **patches**-Abdeckplättchen.
- Nach Auftragen einer dicken Schicht **gel** auf das gesamte Hautareal, das behandelt werden soll, bewegen Sie den Applikator entlang des markierten Areals (zum Aussenden eines Lichtimpulses, siehe nächste Seite).
- Beim Aufsetzen des Applikators wird ein leichter Abdruck hinterlassen, an dem man erkennen kann, welche Hautzone gerade behandelt worden ist. Dadurch lässt sich beim Übergang von einem mit Pulslicht behandelten Hautareal zum nächsten leicht unterscheiden, welches Areal schon behandelt wurde und welches noch nicht. Eine Überlappung von etwa 1 mm ist möglich.
- Tragen Sie eine dicke Schicht **gel** auf das gesamte Hautareal auf, das mit Pulslicht behandelt werden soll. Es darf auf keinen Fall ins Innere des beweglichen Applikatorkopfes gelangen.

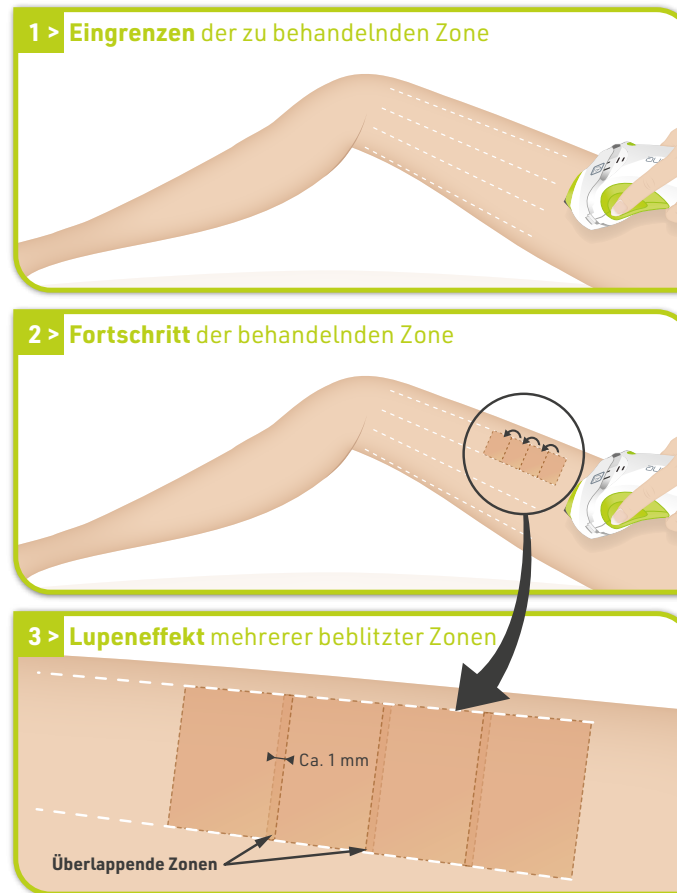

WÄHREND DER ANWENDUNGSSITZUNG ZUTREFFENDE VORSICHTSMASSNAHMEN

- Sie sollten Ihre **mask**-Schutzbrille ständig tragen. Wenn andere Personen sich in der Nähe des eingeschalteten Gerätes aufhalten, so sollten auch diese die **mask**-Schutzbrille tragen.

WICHTIG: Die Hautareale um die Augen herum nicht mit Pulslicht behandeln (Hautareale unter der **mask**-Schutzbrille, die Ihre Augen, Augenbrauen, Wimpern usw. schützt).

- Sollten Sie vorhaben, ein größeres Hautareal mit Pulslicht zu behandeln, dann geben Sie nicht schon am Anfang **gel** auf das gesamte Hautareal. Es trocknet sonst aus und verliert seine Effizienz in Bezug auf seine optische Leitfähigkeit. Tragen Sie daher das **gel** nach und nach auf die progressiv behandelten Hautbereiche auf. Wurde das **gel** einmal für Pulslicht-Anwendung auf der Haut verwendet, sollte es auf keinen Fall auf einem anderen Hautareal wieder verwendet werden. Durch den Lichtimpuls können sich die optischen Eigenschaften des Gels verändert haben.

ZU BEACHTEN: Das verwendete Zubehör: der **pen**-Arbeitsstift, das **gel**, die Selbstklebe-Abdeckplättchen **patches**, die **stop**-Begrenzungsplatte und die **mask**-Schutzbrille muss das von E•One gelieferte Material sein. Der Gebrauch anderer Produkte könnte zu Hautverbrennungen führen und bewirkt den Verlust der Herstellergarantie für Ihr Gerät.




EIN TIPP! Um das Abnehmen des Applikators von der Basis zu erleichtern, fassen Sie ihn nahe am breiten, weißen Kabel. So können Sie ihn bequem aus der Halterung herausnehmen.

HAARENTFERNUNG MIT EOne

AUSSENDEN EINES LICHTIMPULSES

- Damit geblitzt werden kann, muss das gläserne Endstück des Applikators (die Lichtführung) auf die Haut aufgesetzt werden. Dann sollte ein Druck ausgeübt und der Applikatorkopf niedergedrückt werden, so dass dieser auf die Haut drückt.
- Der Lichtimpuls kann dann ausgelöst werden, indem man den Knopf an der Seite des Applikators drückt.
- Der Druck auf den Applikatorkopf muss nun gelöst und der Applikator von der Haut abgehoben werden.
- Danach wird der Applikator auf das nächste, dem eben geblitzten Hautareal benachbarte Areal aufgesetzt. Der nächste Lichtimpuls kann erst dann ausgelöst werden, wenn die Anzeigelampe grün leuchtet (wenn der Applikator ausgelöst wird, bevor die Anzeigelampe grün leuchtet, wird kein Lichtimpuls ausgesendet).
- Achten Sie darauf, die Haut so straff zu ziehen, so dass das gläserne Endstück (Lichtführung) des Applikators die Haut berührt, und vergewissern Sie sich, dass Sie alle Haare sauber von dem zu behandelnden Hautareal entfernt haben.

ACHTUNG: Für jeden Blitz entspricht das behandelte Areal dem Bereich, der vom Endstück der Lichtführung abgedeckt wird, d.h. $3 \times 2 = 6 \text{ cm}^2$. Die Glasfläche (Lichtführung) am Endstück des Applikators muss ganz flach auf der Haut aufliegen.

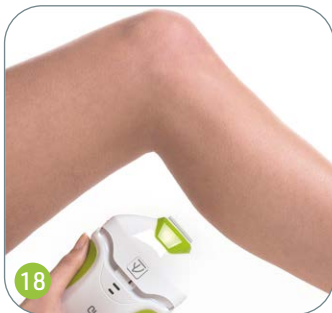

SCHRITT 6

ENDE DER ANWENDUNGSSITZUNG

- Drücken Sie die Taste 1
- Wenn der im Applikator eingebaute Ventilator ausgeschaltet ist (nach etwa 10 Minuten), kann der Netzstecker gezogen werden. Die anderen Ventilatoren in der Basis des EOne hören erst auf zu laufen, nachdem der Netzstecker des Gerätes gezogen ist.
- Reinigen Sie das gläserne Endstück des Applikators (Lichtführung) mit einem feuchten Tuch.
- Abschließend die Lichtführung mit dem clean-Spray reinigen. (Bilder 20 und 21).

Wenn Sie Ihre Anwendung mit dem EOne beendet haben, müssen Sie abwarten, bis die Ventilatoren im Inneren des Applikators ganz zum Stillstand gekommen sind. Dies erlaubt unter anderem das korrekte Auskühlen der optischen Komponenten. Die anderen Ventilatoren in der Basis hören erst auf zu laufen, nachdem der Netzstecker des Gerätes gezogen ist.

- Verstauen Sie danach Ihr EOne wieder an seinem Aufbewahrungsort



Wenn das Epilations-Programm gestartet ist, lädt das Gerät automatisch: vertikale Leisten scrollen im unteren Bildschirm von rechts nach links (wo das Symbol 22 angezeigt wird). Es lädt auch nach jedem Blitz und zeigt die Zahl der noch auf der optic-Kassette verfügbaren Lichtimpulse an. Wenn das Gerät 15 Minuten lang inaktiv ist, schaltet es automatisch in den Pausen-Modus.

ACHTUNG: Wenn das Gerät etwa 10 Minuten lang inaktiv bleibt, schaltet es automatisch den Energiesparmodus ein. Die Ventilatoren im Inneren des Applikators werden ausgeschaltet, im Unterschied zu den Ventilatoren in der Basis: diese stoppen erst nach Ziehen des Netzsteckers des Gerätes. Damit die Ventilatoren wieder eingeschaltet werden, genügt es, einen Lichtimpuls auszusenden.

ACHTUNG: Nach einer Epilationssitzung können kleine rote Flecken auftreten. Das ist eine normale Reaktion der Haut; diese Flecken verschwinden rasch wieder. Verwenden Sie bei empfindlicher Haut nach einer Epilationssitzung mit dem auf den mit Lichtblitz behandelten Hautarealen eine Woche lang keine Haarentfernungs-Creme.



WECHSELN DER OPTIC EOne - KASSETTE

Dieser Schritt muss mit äußerster Vorsicht ausgeführt werden. Jeder falsche Handgriff kann bleibende Schäden am Applikator und am gesamten EOne hervorrufen. Falsche Handhabung bzw. Fehlbedienung wird von der Garantie nicht gedeckt. Wir empfehlen Ihnen daher, die vorgeschriebene Prozedur sehr sorgfältig einzuhalten.

SCHRITT 1

Die Kassette muss gewechselt werden, wenn die angezeigte Zahl der noch verfügbaren Lichtimpulse gleich 0 ist. Wenn dies der Fall ist, (20) erscheint das Symbol der Lampe in der Anzeige, jedoch ohne zu blinken (Bildschirm J).

Sie können Ihren Verbrauch jederzeit am Bildschirm überwachen.



SCHRITT 2

Bevor Sie Ihr Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen, müssen Sie abwarten, bis der Ventilator im Inneren des Applikators komplett zum Stillstand gekommen ist (dies kann mehrere Minuten dauern). Dies ermöglicht das Auskühlen der optischen Komponenten des Applikators; die anderen Ventilatoren in der Basis des EOne hören erst auf zu laufen, nachdem der Netzstecker des Gerätes gezogen ist.

SCHRITT 3

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes.


SCHRITT 4

HERAUSNEHMEN DER KASSETTE

- Nehmen Sie den Applikator und drücken Sie die 2 Verriegelungsstifte des beweglichen Kopfes gleichzeitig (23), entfernen Sie den Kopf.
- Nachdem der bewegliche Kopf entfernt wurde, ist im Applikator die optic-Kassette mit dem Filter sichtbar (24).
- Nehmen Sie die optic-Kassette aus dem Applikator: drücken Sie fest auf die Filterhalterung (25) und ziehen Sie an der Kassette (26). Die optic-Kassette mit Filter lässt sich herausnehmen (27); es ist wichtig, sie nur an den Kunststoffteilen zu fassen.



Der Filter darf nie von der dazugehörigen optic-Kassette getrennt werden.

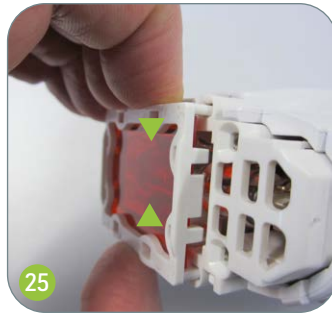

WECHSELN DER OPTIC EOne - KASSETTE

SCHRITT 5

ENTGEGENNAHME UND AUSPACKEN DER NEUEN optic-KASSETTE

Nehmen Sie die neue **optic**-Kassette aus der Plastikbox (28 & 29).

SCHRITT 6

EINSETZEN EINER NEUEN KASSETTE


- Nehmen Sie die neue **optic**-Kassette und prüfen Sie, welches die richtige Ausrichtung der Kassette für das Einschieben ist.

- Richten Sie die **optic**-Kassette und den Applikator anhand der roten Punkte aneinander aus (3).

ACHTUNG: Die Kassetten sind nicht symmetrisch, daher müssen sie auf eine ganz bestimmte Weise, so und nicht irgendwie anders, eingesetzt werden. Als Hilfe beim Einsetzen der Kassette ist die Unterseite der Kassette mit einem roten Punkt gekennzeichnet.

- Schieben Sie sie in die beidseitige Führung des Applikators und drücken sie an beiden Seiten, um sicher zu stellen, dass sie korrekt sitzt (31).

- Nachdem Sie die Kassette eingesetzt haben, müssen Sie sich vergewissern, dass sie (32) richtig positioniert ist: sie muss mit dem feststehenden Teil des Applikators in einer Fluchtlinie ausgerichtet sein (32).

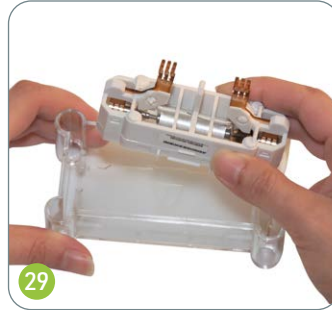

Ist dies nicht der Fall (steht die Kassette mehr als 2 mm über), so bedeutet dies, dass die Kassette nicht korrekt eingesetzt wurde: Sie müssen sie wieder herausnehmen und Folgendes prüfen:

- Dass die roten Punkte ausgerichtet sind und aufeinander treffen (33).
- Ob Sie die Elektroden nicht verdreht (verbogen) haben. Wenn Sie die Elektroden verdreht (verbogen) haben, setzen Sie die **optic**-Kassette nicht in Ihr **EOne** ein, da dies schwerwiegende Schäden an Ihrem Gerät verursachen könnte. Sie müssen in diesem Fall die beschädigte Kassette an uns zurücksenden und eine neue bestellen.



SCHRITT 7

Bevor Sie den beweglichen Kopf des Applikators wieder einsetzen, müssen Sie immer den Filter reinigen (er befindet sich direkt an der **optic**-Kassette), und zwar mit dem clean-Spray, jedoch nur an der zugänglichen Fläche. Es darf absolut kein clean-Spray direkt auf den Filter gesprüht werden. Es muss zuvor auf ein sauberes, trockenes Tuch gesprüht werden, mit dem dann die zugängliche Seite des Filters gereinigt werden muss (35).



SCHRITT 8

Setzen Sie den beweglichen Kopf des Applikators wieder auf, indem Sie gleichzeitig auf die Sperr-Stifte drücken (36). Achten Sie dabei darauf, dass die roten Punkte innen am Kopf mit den roten Punkten auf dem Applikator aufeinander treffen.

SCHRITT 9

Wenn der Vorrat an verfügbaren Lichtimpulsen zu Ende geht, müssen Sie eine neue **optic**-Kassette bestellen (diese wird mit der zugehörigen Aktivierungskarte geliefert).

VORSICHTSMASSNAHMEN: Während des gesamten Vorganges des Kassettenwechsels dürfen Sie keinesfalls die Elektroden der Röhre berühren (34). Wenn Sie versehentlich doch die Röhre oder den dazugehörigen Reflektor berührt haben, raten wir dringend dazu, die Kassette an uns zurück zu senden, um sie umzutauschen.



WARNUNG: Es ist streng verboten, Änderungen irgendwelcher Art an Ihrem **EOne** vorzunehmen.

I OPTIONEN DER SOFTWARE

PIN-CODE

Sie können Ihr Gerät durch Eingabe eines PIN-Codes sichern. Solange kein spezifischer PIN-Code eingegeben wurde, erscheint das Sperr-Symbol rot durchgestrichen (16). Dies bedeutet, dass das Gerät nicht gesperrt ist; es ist also kein Code einzugeben. In Standard-Einstellung lautet der Code 0000. Wenn Sie keine Änderung des PIN-Codes vornehmen, wird nicht jedes Mal beim Einschalten des Geräts ein Code abgefragt. Wenn Sie jedoch den Standard-PIN-Code (0000) ändern, müssen Sie den neuen PIN-Code jedes Mal beim Einschalten des Gerätes eingeben **E•One**.

• Ändern des PIN-Codes

Um den PIN-Code zu ändern müssen Sie Folgendes tun:

- Auf das Sperr-Symbol klicken (16). Die Zahl 1, die sich neben dem Symbol der Lampe befindet, (20) beginnt zu blinken: Sie müssen den 1. Code eingeben.
- Geben Sie den PIN-Code (4 Ziffern) mit Hilfe der Navigations-Symbole ein (12). Sie ermöglichen Ihnen die Änderung der Zahl für jede Stelle (vertikale Pfeile) sowie die Fortbewegung von einer Stelle des Codes zur anderen (horizontale Pfeile). Nachdem die 4 Ziffern für den Code eingegeben sind, bestätigen Sie diese durch Klicken auf das Symbol (14). Die Zahl 2 neben dem Symbol (20) beginnt zu blinken: Sie müssen den zweiten Code eingeben.
- Geben Sie Ihren Code zum zweiten Mal ein (Bestätigungseingabe) und validieren Sie erneut (Validierungs-Symbol 14).

Wenn die Eingabe abgeschlossen ist, gelangen Sie automatisch zurück zum vorherigen Menü.

Wenn jedoch der beim zweiten Mal eingegebene Code nicht mit dem ersten übereinstimmt, blinkt das Warn-Symbol (17), und es wird die Fehlermeldung Nr.13 angezeigt. Sie müssen auf das Validierungs-Symbol (14) drücken und den ganzen Vorgang wiederholen (PIN-Code eingeben, denselben PIN-Code zur Bestätigung erneut eingeben).

Nach dieser Prozedur werden Sie jedes Mal beim Einschalten Ihres Gerätes nach dem PIN-Code gefragt. Das Entsperrungs-Symbol (16) blinkt (es ist nicht mehr rot durchgestrichen). Sie müssen den PIN-Code eingeben (nur ein Mal). Wenn der eingegebene Code richtig ist, werden die sicherheitstechnischen Symbole angezeigt. Wenn der Code falsch eingegeben wird, blinkt das Warn-Symbol (17) und es wird die Fehlermeldung NR. 14 angezeigt.

• Den PIN-Code ungültig machen

Es ist nur möglich, den PIN-Code außer Kraft zu setzen, wenn das bereits in Betrieb ist, d.h. der PIN-Code, den Sie ändern möchten beim Einschalten bereits eingegeben wurde. Sie müssen dazu einmal auf das Entsperr-Symbol (16) klicken und den PIN-Code 1 nur einmal eingeben.

• Einen vorhandenen PIN-Code ändern

Die Änderung eines vorhandenen PIN-Codes, wenn bereits ein spezifischer Code existiert, ist möglich, jedoch nur wenn das bereits in Betrieb ist, d.h. wenn der PIN-Code, den Sie ändern möchten, beim Einschalten bereits eingegeben wurde. Dazu klicken Sie einmal auf das Sperr-Symbol (16) und geben den aktuellen Code einmal ein und validieren ihn anschließend (Validierungs-Symbol (14)). Das Gerät ist entsperrt, der rote Schrägstrich erscheint auf dem Sperr-Symbol (16). Es ist nun möglich, einen neuen PIN-Code einzugeben, indem man dieselben Schritte absolviert, wie zuvor beschrieben.

ACHTUNG: Wenn Sie irrtümlich das Sperr-Symbol angewählt haben (16) und keinen persönlichen PIN-Code eingeben möchten, gehen Sie zu dem Symbol für das Zurückblättern (13).

WICHTIG: Wenn Sie sich nicht mehr an den PIN-Code erinnern können, den Sie eingegeben haben, müssen Sie Ihr Gerät an uns zurücksenden und vom technischen Support Ihr Gerät entsperren lassen. Dieser Service wird nicht von der Garantie abgedeckt; er wird Ihnen in Rechnung gestellt.

AKUSTISCHE TASTEN

In der Standard-Einstellung sind die "Beep"-Tasten aktiviert; es ist jedoch möglich, sie zu deaktivieren. Darum empfehlen wir, einen einfachen PIN-Code zu wählen, an den Sie sich erinnern können, allerdings sollten Sie sich ihn dennoch irgendwo getrennt vom Gerät notieren



DAS DÜRFEN SIE NIE TUN

I DAS DÜRFEN SIE NIE TUN, WENN SIE IHR E►One BENUTZEN

Diese Handlungen sind deshalb verboten, weil Sie dadurch möglicherweise in Gefahr gebracht würden oder Ihr Gerät dadurch irreparabel beschädigt werden könnte.




Nicht mit der Hand oder auf sonstige Art das Belüftungsgitter am Applikator abdecken.



Die Basis des E►One nicht mit einem Tuch abdecken, um nicht das im oberen Teil befindliche Belüftungsgitter abzudecken.




Die Basis des E►One nicht auf eine weiche Unterlage (z.B. ein Bett) abstellen, das könnte zu einem Verschluss des unteren Belüftungsgitters führen.



Wenn die optic-Kassette entfernt ist, nur die Kunststoffteile anfassen, keinesfalls die Metallteile, die Lampe, die Elektroden, die Röhre oder den Reflektor.



Niemals versuchen, den Applikator auseinander zu bauen.

 Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät zu öffnen. Alle Eingriffe müssen von ordnungsgemäß durch den Hersteller zugelassenen Fachkräften vorgenommen werden.

ACHTUNG: Anders als die Ventilatoren im Inneren des Applikators, hören die anderen, in der Basis befindlichen Ventilatoren E►One erst dann auf zu laufen, nachdem der Netzstecker gezogen ist.

VERWENDUNG DES ZUBEHÖRS

Der **pen** Arbeitsstift dient zum Markieren des Hautareals, das behandelt werden soll. Die Stift-Markierungen müssen vorgenommen werden, bevor das **gel** aufgetragen wird.

WICHTIG: Es darf nur der **pen** -Arbeitsstift zum Markieren der mit Pulslicht zu behandelnden Hautareale verwendet werden. Er wurde erfolgreich auf Beständigkeit gegenüber den Lichtimpulsen getestet (keine Reaktion). Die Verwendung anderer Stifte kann zu Hautverbrennungen führen, wenn der Lichtblitz auf die mit dem Markierungsstift auf der Haut gezogene Linie auftrifft.



Made in China

pen

Das **gel** für die Pulslicht-Anwendung sollte bei Zimmertemperatur aufbewahrt werden. Es wird in dicken Schichten und nach und nach, mit Fortschreiten von Hautareal zu Hautareal aufgetragen, so dass es nicht auf der Haut eintrocknet. Wurde das **gel** einmal für Pulslicht-Anwendung auf der Haut verwendet, sollte es auf keinen Fall auf einem anderen Hautareal wieder verwendet werden. Wenn das **gel** bereits Pulslicht ausgesetzt war, können sich durch den Lichtimpuls seine optischen Eigenschaften verändert haben. Am Ende der Anwendungssitzung muss es mit einem feuchten Handtuch oder durch Duschen von der Hautoberfläche entfernt werden. Es muss von den optischen Komponenten und vom beweglichen Teil des Applikators entfernt werden, dazu verwendet man ein leicht feuchtes Tuch und anschließend clean -Spray.

Wirkstoff-Komponenten:
Methylisothiazolinon und Methylchloroisothiazolinon (MCI/MI).
Ihr Anteil, im Mischungsverhältnis 3 :1, beträgt 0,0008%. Enthält kein Formaldehyd. Vor Licht geschützt aufbewahren. Nur zur äußeren Anwendung. Nicht auf Haut anwenden, die Verletzungen, Verbrennungen oder Infektionen aufweist.



Made in Europe

gel

Es sollte von allen zum Zeitpunkt des Lichtimpulses anwesenden Personen eine **mask** -Schutzbrille getragen werden. Sie erlaubt die Ausgrenzung der Hautareale, die niemals geblitzt werden dürfen (z.B. Augenwimpern, Augenbrauen usw.).



Made in China

mask

Die **optic** -Kassette hat eine vorprogrammierte Lebensdauer, die vom ersten bis zum letzten verfügbaren Lichtimpuls eine gleichbleibende Qualität des ausgesandten Lichtes garantiert. Die Kassette wird zusammen mit der dazugehörigen Aktivierungskarte geliefert.

Die **optic** -Kassette und die dazugehörige Aktivierungskarte müssen ausgewechselt werden, wenn der Vorrat an verfügbaren Lichtimpulsen erschöpft ist.



Made in France

optic

Das clean Spray dient zum Reinigen und Pflegen:

- Für die optischen Komponenten des beweglichen Kopfes des Applikators.
- Für die externen optischen Komponenten: direkt besprühen und mit einem trockenen Baumwolltuch abwischen.
- Interne optische Komponenten: Niemals direkt auf die internen optischen Komponenten sprühen. Nehmen Sie ein trockenes Baumwolltuch und sprühen Sie das Spray darauf und danach reinigen Sie mit dem benetzten Tuch den Filter (das flache Teil aus rot eingefärbtem Glas). Abschließend mit einem trockenen Teil des Tuches trocken polieren.
- Der Berührungsbildschirm des Gerätes: Besprühen Sie ein trockenes Baumwolltuch mit dem Spray und wischen Sie dann den Bildschirm mit dem benetzten Tuch ab. Abschließend mit einem trockenen Teil des Tuches trocken polieren.

Das clean Spray darf nur angewendet werden, wenn der Netzstecker des Gerätes gezogen ist und die optischen Komponenten ausgekühlt sind.

Wenn Sie die Pflege des Geräts im Anschluss an eine Anwendung durchführen wollen, müssen Sie zunächst abwarten, bis das Gerät völlig zum Stillstand kommt, und erst dann den Netzstecker der Basis ziehen, um die Stromversorgung zu unterbrechen. Dies erlaubt unter anderem das korrekte Auskühlen der optischen Komponenten.



Made in France

clean


Diese Selbstklebe-Abdeckplättchen **patches** werden zum Abdecken kleiner Hautareale verwendet, die nicht geblitzt werden dürfen (z.B. Leberflecke, Muttermale). Sie müssen nach dem Rasieren und vor dem Auftragen des Gels **gel** aufgeklebt werden. Dann ist es möglich, ein beliebiges Hautareal zu blitzen, ohne sich weiter um die Leberflecke und Muttermale zu kümmern. Die **patches** werden am Ende der Anwendungssitzung wieder entfernt.



Made in France

patches

Die Begrenzungsplatte ist aus einem Material gefertigt, das gegen die Lichtimpulse beständig ist. Dies ermöglicht es Ihnen, ein Hautareal abzudecken, auf das kein Pulslicht auftreffen soll (z.B. eine Tätowierung). Das gläserne Endstück des Applikators (Lichtführung) kann auch in der Mitte zwischen der **stop** Begrenzungsplatte und der Haut platziert werden.

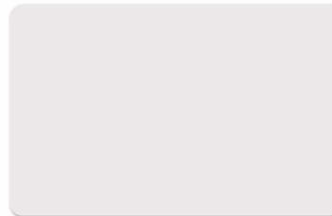

Made in France

stop

Diese fun Schablonen dienen dazu, Hautareale zu markieren, die nicht geblitzt werden sollen, weil dort absichtlich, zum Spaß, Haare stehen bleiben sollen. Sie müssen nach der kompletten Rasur und dem Auftragen des Gels platziert werden. Dank dem **gel** haften diese Schablonen. Es ist möglich, in der Mitte, zwischen den Schablonenkanten und der Haut zu blitzen, so dass man eine klare Konturlinie der gewünschten Form erhält.



Made in France

fun (optional)

Überprüfen Sie, ob der Netzstecker Ihres **E•One** gezogen ist, wenn Sie Pflegearbeiten an dem Gerät vornehmen. Wenn Sie diese Arbeiten unmittelbar nach einer Anwendung durchführen wollen, müssen Sie zunächst abwarten, dass der Ventilator des Geräts komplett zum Stillstand kommt, und erst danach den Netzstecker ziehen. Dies erlaubt unter anderem das korrekte Auskühlen der optischen Komponenten.

ACHTUNG: Anders als die im Applikator befindlichen Ventilatoren, laufen die Ventilatoren in der Basis des weiter, bis der Netzstecker des Gerätes **E•One** gezogen wird.

I BASIS

- **Kunststoffteile**
Alle Kunststoffteile des **E•One** müssen mit einem sauberen, mit Wasser (ohne Zusätze) angefeuchteten Tuch gereinigt werden.
- **Berührungsbildschirm**
Der Bildschirm muss mit einem sauberen, mit clean Spray benetzten Tuch gereinigt werden (niemals clean Spray direkt auf den Berührungsbildschirm sprühen).
- **Stromversorgungskabel**
Überprüfen Sie den einwandfreien Zustand des Kabels (es darf weder geknickt noch gequetscht sein, und es darf kein Draht offen liegen).
Reinigen Sie das Kabel mit einem Tuch, das zuvor mit Wasser (ohne Zusätze) angefeuchtet wurde.

I APPLIKATOR

- **Beweglicher Kopf**
Wenn Sie die (internen und externen) optischen Komponenten des beweglichen Kopfes vor und nach jedem Gebrauch mit dem clean Spray reinigen, erhalten Sie die Leistungsfähigkeit Ihres **E•One**. Sprühen Sie niemals direkt auf die **optic**-Kassette oder den dazugehörigen Filter.
- **Gehäuse des Applikators**
Alle Kunststoffteile des Applikators müssen mit einem sauberen, mit Wasser (ohne Zusätze) angefeuchteten Tuch gereinigt werden.

I VERBINDUNGSKABEL BASIS APPLIKATOR

Dieses Kabel muss immer sauber und in einwandfreiem Zustand ohne sichtbare Schäden sein. Es darf nicht geknickt oder eingeklemmt werden. Wenn Zweifel am einwandfreien Zustand des Kabels auftreten, dürfen Sie ab sofort Ihr **E•One** nicht mehr verwenden.

I DIE BELÜFTUNGSSCHLITZE DER BASIS UND DES APPLIKATORS

Der Applikator und die Basis werden belüftet. Belüftungsgitter sind sowohl am Applikator als auch an der Basis, am unteren und am oberen Teil der Rückseite, vorhanden. Sie müssen kontrollieren, ob alle diese Gitter sauber und frei von Fremdkörpern sind, die sie möglicherweise verschließen könnten.

WICHTIG: Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Belüftungsgitter tropft.

I AUFBEWAHRUNG

- Bewahren Sie Ihr **E•One** und das Zubehör in der dazugehörigen Box auf.
- Bewahren Sie Ihr **E•One** in einem Raum auf, dessen Temperatur 25°C nicht überschreitet. Verpackt, geschützt vor allzu starkem Dampfnebel (z.B. Badezimmer) und an einem Ort, wo das Gerät keinen Schwingungen ausgesetzt ist (wie etwa auf einer Waschmaschine).
- Wenn das Gerät einer Stoßwirkung ausgesetzt war, müssen die optischen Komponenten in ihrer Gesamtheit überprüft werden.
- Bei Feststellung irgendwelcher sichtbarer Schäden an den optischen Komponenten: Filter (flaches Teil aus rot eingefärbtem Glas), Lichtführung, Röhre usw. darf das Gerät keinesfalls weiter verwendet werden, es muss sofort aus dem Gebrauch gezogen werden.

ZU BEACHTEN: Lagertemperatur: -5 ° C bis + 65 ° C.
Lagertemperatur, wenn das Gerät sofort gebraucht werden soll: +5 ° C bis +25 ° C
Gebrauch und Lagerung an einem Ort, wo die relative Feuchtigkeit weniger als 93 % beträgt.

TECHNIK-SERVICE

Wenn Sie Zweifel haben, ob **E•One** gebrauchsfähig ist oder nicht, wenden Sie sich bitte an unseren Technik-Service. Kontaktieren Sie uns über unsere Webseite www.esw-beauty.com.







FEHLERMELDUNGEN

Zusätzlich zu der spezifisch zugeordneten Nummer (siehe Tabelle weiter unten) wird jede Fehlermeldung noch durch ein Warn-Symbol signalisiert (**17**).

Bildschirm-Anzeige	Bedeutung	Was ist zu tun?
01	Kein Lichtimpuls erkannt.	Wenden Sie sich bitte an unseren Technik-Service. Kontaktieren Sie uns über unsere Webseite www.esw-beauty.com .
02	Das Gerät erkennt die optic -Kassette nicht.	Setzen Sie die neue optic -Kassette ein; beachten Sie dabei sorgfältig die Anweisungen zur Handhabung.
03 04 05 08	Ihr Gerät ist blockiert.	Ziehen Sie den Netzstecker Ihres Gerätes, stecken Sie das Gerät wieder an die Netzstromversorgung an (befolgen Sie dazu die Anweisungen auf Seite 29). Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an unseren Technik-Service. Kontaktieren Sie uns über unsere Webseite www.esw-beauty.com .
06 (und Blinken des Temperatur-Symbols (19))	Zeitweilige Blockierung.	Warten Sie ab, bis der Vorgang des Kühlens der optischen Komponenten des Applikators beendet ist.
10 (und Blinken des Symbols, dass die Aktivierungskarte erkennt (18))	Verlust der Verbindung mit der Aktivierungskarte.	Kontrollieren Sie, ob die Karte vorhanden ist und korrekt funktioniert. Sie brauchen sie dafür nur wieder einzulegen (Siehe Seite 28).
13	Sie haben den falschen PIN-Code eingegeben (als Sie das Gerät gestartet haben, war der eingegebene PIN-Code anders als der zuvor aufgezeichnet).	Befolgen Sie die Anweisungen zum Eingeben des Codes (siehe Seiten 36 & 37).
14	Sie haben den falschen PIN-Code eingegeben (die 2 nacheinander eingegebenen PIN-Codes sind nicht identisch).	Wenden Sie sich bitte an unseren Technik-Service. Kontaktieren Sie uns über unsere Webseite www.esw-beauty.com .



I SPEZIFIKATIONEN

<div>REF</div> <div>: </div>	Referenz Epiliergerät  (Clinic Acces, SC, RC und RC Multi).
<div>SN</div> <div>.....</div>	Geräte-Seriennummer Ihres  .
<div> E-SWIN Rue des Côtes d'Orval ZA de la Prévôté 78550 Houdan - FRANCE 2014</div>	Herstellungsjahr des Gerätes und Adresse des Herstellers.
<div> 0197</div>	Medizinprodukt gemäß den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG, von einer unabhängigen Zertifizierungsstelle zertifiziert.
<div>IP2X</div>	Das Gerät ist gegen feste Fremdkörper mit einem Durchmesser von 12.5 mm oder mehr geschützt (Schutzart IP).
<div></div>	Logo für eine Schutzebene gegen Stromschlag für mit dem Patienten in Berührung kommende Teile (Anwendungsteil vom Typ BF).
<div></div>	Elektrisches Gerät der Klasse II.
<div></div>	Das Gerät darf nur in Innenräumen verwendet werden.
<div></div>	Das Gerät muss vor Feuchtigkeit geschützt werden.
<div></div>	Vor Licht und Hitze geschützt aufbewahren.
<div></div>	Die Anweisungen der Gebrauchsanleitung sind unbedingt einzuhalten.
<div>100 - 240 V~ 50-60 Hz 240 VA</div>	Betriebsbedingungen - Versorgungsspannung (Wechselstrom), Frequenz der Hauptversorgungsspannung, Leistung.
<div></div>	Warnung, Gerät unter gefährlicher elektrischer Spannung.
<div></div>	Allgemeines Sicherheitskennzeichen für elektronische Geräte.
<div></div>	Die auf diesem Logo angegebene obere und untere Temperaturgrenze ist einzuhalten.
<div></div>	Das Produkt nach dem unter diesem Symbol angegebenen Datum nicht mehr verwenden.
<div>LOT</div>	Neben diesem Logo steht die Chargennummer des Produkts.

I SPEZIFIKATIONEN

Auftreffpunkte, Spezifikationen	2 cm x 3 cm (6 cm²)	
Pulsgeschwindigkeit	1 Impuls alle 3,8 bis 6 Sekunden	
Technologie	Intensiv-Pulslicht	
Wellenlänge	>580 - 1200 nm	
Ladezeit / Energiequelle	kontinuierlicher Betrieb	
Maße (l x b x h)	240 x 210 x 390 mm max	
Gewicht	5,1 kg maximal	
Verpackungsmaße (L x W x H)	510 x 290 x 510 mm	
Verpackungsgewicht	8 kg maximal	
Schallpegel	53 dBA maximal	
Voraussetzungen Elektroinstallation	100 – 240 VAC	
Leistungsaufnahme	240 VA	
Frequenz	50/60 Hz	
Temperatur	Betrieb	+5 à +25°C
	Lagerung	-5 à -65°C
Relative Feuchtigkeit	30 – 93 %	

I RECYCLING UND AUFBEREITUNG



Anweisungen bezüglich der Behandlung von Altgeräten: Die Richtlinie 2020/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dient dem Ziel sicher zu stellen, dass diese Produkte unter Anwendung der besten verfügbaren Aufbereitungs-, Verwertungs- und Recyclingtechniken recycelt werden, und so einen Beitrag zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit der Menschen zu leisten.

Ihr Produkt wurde unter Verwendung qualitativ hochwertiger Komponenten und Werkstoffe entwickelt und hergestellt, die recycelt und wieder verwendet werden können.

E-Swin SAS gehört einer ökologisch orientierten Organisation an, die sich die Erfassung und Aufbereitung von Produkten am Ende des Lebenszyklus zur Aufgabe gemacht.

RICHTLINIEN UND KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DES HERSTELLERS


ELEKTROMAGNETISCHE STRAHLUNG

Das Gerät ist für den Gebrauch in einer elektromagnetischen Umgebung bestimmt, die wie folgt spezifiziert ist: Es obliegt dem Benutzer des **E•One** sich zu vergewissern, dass die Umgebung, in der das Gerät verwendet wird, diese Bedingungen erfüllt.

Emissionstest	Konformität	Elektromagnetische Umgebung Richtlinien
HF-Emissionen CISPR 11	Gruppe 1	E•One verwendet die HF-Energie nur für seine internen Funktionen. Dementsprechend sind die HF-Emissionen sehr gering und es ist unwahrscheinlich, dass sie in einem in der Nähe befindlichen elektronischen Gerät Interferenzen auslösen.
HF-Emissionen - CISPR 11	Klasse B	E•One kann in Räumen aller Art verwendet werden, auch im häuslichen Wohnbereich und in Räumen, deren Elektroinstallation direkt an das öffentliche Niederspannungs-Stromversorgungsnetz für Wohngebäude angeschlossen ist.
Harmonische Strahlung - IEC 61000-3-2	Klasse A	
Spannungsschwankungen Flimmern - IEC 61000-3-3	bestanden	

ELEKTROMAGNETISCHE STÖRFESTIGKEIT

E•One ist für den Gebrauch in einer elektromagnetischen Umgebung bestimmt, wie sie nachstehend spezifiziert ist. Es obliegt dem Benutzer des **E•One** sich zu vergewissern, dass die Umgebung, in der das Gerät verwendet wird, diese Bedingungen erfüllt.

Störfestigkeitsprüfung	Testniveau gemäß IEC60601	Konformitätsniveau	Elektromagnetische Umgebung Richtlinien
Entladung statischer Elektrizität (ESE) IEC 61000-4-2	± 6 kV Kontakt ± 8 kV Luft	± 6KV Kontakt ± 8 kV Luft	Fußböden sollten aus Holz, Beton oder Keramikfliesen sein. Wenn der Fußbodenbelag aus synthetischen Materialien besteht, dann sollte die relative Feuchtigkeit mindestens 30% betragen.
Schnelle transiente elektrische Störgrößen /Impulse IEC 61000-4-4	± 2 kV für elektrische Versorgungsleitungen ± 1 kV für Eingangs- / Ausgangsleitungen	± 2KV für elektrische Versorgungsleitungen Nicht zutreffend.	Die Qualität des Versorgungsnetzes muss der Qualität eines öffentlichen Niederspannungsnetzes entsprechen.
Stoßspannung IEC 61000-4-5	± 1 kV Gegentakt ± 2 kV Gleichtakt	± 1 kV Gegentakt ± 2 kV Gleichtakt	Die Qualität des Versorgungsnetzes muss der Qualität eines öffentlichen Niederspannungsnetzes entsprechen.
Spannungseinbrüche, kurzzeitige Spannungsunterbrechungen und Spannungsschwankungen der Stromversorgungsleitungen / Eingangsleitungen. IEC 61000-4-11	5 % Ut (95% Einbruch Ut) für 0,5 Zyklus 40 % UT (60% Einbruch Ut) für 5 Zyklen 70 % UT (30% Einbruch Ut) für 25 Zyklen 5 % Ut (95% Einbruch Ut) für 0,5 Zyklus	5 % Ut (95% Einbruch Ut) für 0,5 Zyklus 40 % UT (60% Einbruch Ut) für 5 Zyklen 70 % UT (30% Einbruch Ut) für 25 Zyklen 5 % Ut (95% Einbruch Ut) für 0,5 Zyklus	Die Qualität des Versorgungsnetzes muss der Qualität eines typischen öffentlichen Niederspannungsnetzes entsprechen. Wenn der Benutzer des E•One den kontinuierlichen Betrieb auch bei Unterbrechungen der Netzstromversorgung verlangt, dann wird empfohlen, das E•One zur Stromversorgung an eine unterbrechungsfreie Stromversorgung oder an eine Batterie anzuschließen.
Versorgungsspannung Frequenz (50/60Hz) Magnetfeld IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Die Magnetfelder sollten sich bei der Frequenz des Stromversorgungsnetzes auf dem für ein öffentliches Netz charakteristischen Niveau befinden.
RF IEC 61000-4-6, leitungsgeführt RF IEC 61000-4-3, Strahlungsfelder	3Veff von 150Hz bis 80MHz 3V/m on 80 MHz bis 2,5 GHz	3Vrms 3V/m	Tragbare und mobile drahtlose Kommunikationsgeräte sollten in der Nähe des E•One und seiner Teile, einschließlich der Kabel, in Entfernungen unterhalb der empfohlenen Trennweite nicht mehr verwendet werden; die empfohlene Trennweite wird ausgehend von der für die Sendefrequenz geltenden Gleichung berechnet. d = 1,2 √P. d = 1,2 √P 80MHz bis 800 MHz. d = 2,3 √P 800 MHz bis 2,5 GHz. wobei P die maximale Leistungsabgabe des Senders in Watt (W), laut Angaben des Herstellers des Senders, und die empfohlene Trennweite in Metern (m) ist. Die durch eine elektromagnetische Erkundung vor Ort bestimmten Feldstärken stationärer Sender sollten für jeden Frequenzbereich b unterhalb der Werte der Konformitätsanforderungen liegen. In der Nähe eines mit nachstehendem Symbol gekennzeichneten Gerätes können Interferenzen auftreten: 

ELEKTROMAGNETISCHE STÖRFESTIGKEIT

ANMERKUNG 1: Ut ist die Spannung des Wechselstromnetzes vor Anlegen des Testniveaus.

ANMERKUNG 2: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich

ANMERKUNG 3: Es kann auch Situationen geben, in denen diese Orientierungen nicht anwendbar sind. Die Ausbreitung der elektromagnetischen Wellen wird beeinträchtigt durch Absorption und Reflexion unter dem Einfluss von Strukturen, Gegenständen und Personen.

- a Die Feldstärken stationärer Sender, wie Basisstationen für Funktelefone (Zelltelefone/ drahtlose Telefone) und mobile terrestrische Funkgeräte, Amateurfunk, AM- und FM-Radio, Fernsehsender können nicht exakt theoretisch vorhergesehen werden. Zur Bewertung der elektromagnetischen Umgebung unter dem Einfluss von stationären HF-Sendern sollte eine elektromagnetische Erkundung vor Ort erwogen werden. Wenn an dem Ort, wo das Gerät verwendet wird, die gemessene Feldstärke das oben angegebene HF-Konformitätsniveau überschreitet, muss das Gerät **E•One** beobachtet werden, ob es normal funktioniert. Wenn Anomalien der Funktionsleistungen beobachtet werden, können sich zusätzliche Maßnahmen erforderlich machen, wie eine andere Orientierung oder Positionierung/ein anderer Aufstellort des **E•One**.
- b Für den Frequenzbereich 150 kHz bis 80 MHz soll die Feldstärke weniger als 3 V/m betragen.

EMPFOHLENE TRENNWEITEN ZWISCHEN DER TRAGBAREN UND MOBILEN

HF-KOMMUNIKATIONS-AUSRÜSTUNG UND DEM **E•One**

E•One ist für den Gebrauch in einer elektromagnetischen Umgebung bestimmt, in der die Störungen durch HF-Strahlung unter Kontrolle sind. Der Kunde bzw. Benutzer kann zur Vermeidung elektromagnetischer Interferenzen beitragen, indem er so wie nachstehend empfohlen, je nach der maximalen Sendeleistung der Kommunikationsausrüstung einen bestimmten Mindestabstand zwischen der tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsausrüstung (Sender) und dem **E•One** einhält.

Maximale Sendeleistung des Senders - (W)	Trennweite entsprechend der Frequenz des Senders (m)		
	150 Hz bis 80 MHz (d = 1,2 √P)	80 MHz bis 800 MHz (d = 1,2 √P)	800 MHz bis 2,5 GHz (d = 2,3 √P)
0,01	0,12	0,12	0,24
0,1	0,37	0,37	0,74
1	1,20	1,20	2,24
10	3,70	3,70	7,40
100	12	12	24

Für Sender , deren maximale Nenn-Sendeleistung oben nicht angegeben ist, kann die empfohlene Trennweite d in Metern (m) schätzungsweise anhand der für die Frequenz des Senders geltenden Gleichung bestimmt werden, mit P als maximaler Sendeleistung des Senders in Watt (W) laut Angabe des Herstellers.

ANMERKUNG 1: Bei 80 MHz und 800 MHz wird die Trennweite für den höheren Frequenzbereich zugrunde gelegt.

ANMERKUNG 2: Es kann auch Situationen geben, in denen diese Orientierungen nicht anwendbar sind. Die Ausbreitung der elektromagnetischen Wellen wird beeinträchtigt durch Absorption und Reflexion unter dem Einfluss von Strukturen, Gegenständen und Personen.

I ZERTIFIZIERUNGEN

Die Gesellschaft E-Swin SAS, Alleinhersteller des Gerätes, ist zertifiziert nach ISO 13485.

I KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DES HERSTELLERS

E-Swin SAS erklärt hiermit, dass das Gerät **E•One** die wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG, Anhang II, Artikel 3 erfüllt und in Verantwortung der TUV dem Produkt CE-Kennzeichnung zuerkannt wurde.

Dieses Gerät erfüllt somit folgende Anforderungen und Normen: EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-6, EN 60601-1-11.

I VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM GEBRAUCH

Lassen Sie niemals die Basis oder den Applikator mit Wasser in Berührung kommen. Öffnen Sie niemals die Basis oder den Applikator; Sie könnten sich dadurch Hochspannung aussetzen. Verwenden Sie niemals **optic**-Kassetten und anderes Zubehör, das nicht von E-SWIN SAS für das Gerät **E•One** benannt und verkauft wird.

I UMWELTSCHUTZ

Halten Sie bitte bei der Entsorgung von Verpackungs- und Verbrauchsmaterial-Abfällen die örtlich geltenden Bestimmungen ein. Bemühen Sie sich möglichst, dem Recycling den Vorzug zu geben.

Auf Ihr Produkt wird für den privaten Hausgebrauch eine Garantie von zwei Jahren gewährt.

Jegliche Fehler beim Anschließen, bei der Bedienung und Handhabung, jegliche vom Gebrauch als Epiliergerät und generell von den in der vorliegenden Gebrauchsanleitung beschriebenen Bedingungen abweichende Verwendung führen zum Verlust des Garantieanspruchs.

E-SWIN SAS lehnt jegliche Haftung für Unfälle ab, die infolge von unsachgemäßer Verwendung oder Nichteinhaltung der in der vorliegenden Gebrauchsanleitung dargelegten Vorschriften bzw. Nichtbeachtung der verschiedenen Informationen der Etiketten und der Bildschirmanzeigen des **E•One** auftreten könnten.

Die 2-Jahres-Herstellergarantie deckt Ersatzteile und Arbeitskraft ab; sie wird ausschließlich dann wirksam, wenn das Gerät mit allen seinen Teilen zusammen mit der vollständigen Originalverpackung zurückgesandt wird.

Sie müssen die komplette Originalverpackung aufbewahren, in der Ihr **E•One** geliefert wurde



Wenn Sie Fragen zum Kundendienst oder bezüglich Ersatzteilen haben, besuchen Sie bitte unsere Website www.esw-beauty.com oder kontaktieren Sie uns unter commercial@esw-beauty.com

ESWIN

ZA de la Prévôté
Rue des Côtes d'Orval
78550 Houdan
FRANCE
01 30 46 37 61



M009DE000D__ rev. D 22/07/2024



www.esw-beauty.com

