



E-One clinic

Manuel d'utilisation

CONTENU DU PACK E•One	4
PRÉCAUTIONS D'UTILISATION	6
LEXIQUE	12
INFORMATIONS FOURNIES PAR L'ÉCRAN TACTILE DE L' E•One	14
SE DÉPILER AVEC LE E•One	18
CHANGEMENT DE LA CASSETTE OPTIC	32
OPTIONS DU LOGICIEL	40
LES GESTES INTERDITS	44
UTILISATION DES ACCESSOIRES	46
ENTRETIEN	48
ASSISTANCE	50
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	52
NORMES	57
CONDITIONS DE GARANTIE	58
CONTACT	60

Cher(e) client(e),

Merci pour votre confiance dans notre technologie.

L'**E•One** a été conçu pour garantir une utilisation confortable et sûre, fournissant des résultats fiables et convaincants.

L'**E•One**, un traitement avancé IPL à domicile pour l'épilation définitive, doté de notre technologie brevetée de flash et de refroidissement à l'intérieur, peut offrir des avantages visibles dès la première séance et vous surprendra avec une peau lisse sur toutes les zones traitées.

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre site Web :

<https://esw-beauty.com/fr/contact-2>

Nous aimerions également vous inviter à partager votre expérience et votre satisfaction pour nous aider à améliorer continuellement nos produits et services :

(FR) : <https://esw-beauty.com/fr/home-fr#linkShopEn>

Votre Service Client E-Swin

CONTENU DU PACK EOne



1 base EOne et son applicateur




1 clean - spray optique




1 optic avec filtre inclus - cassette de consommable et son filtre optique (inclus dans l'applicateur de votre EOne)



1 carte d'activation EOne

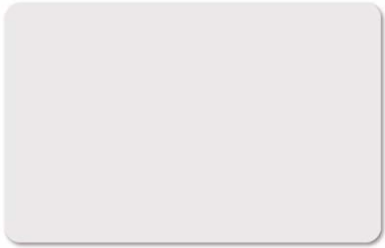

1 stop plaque de délimitation

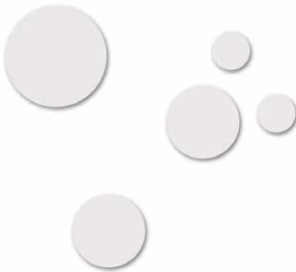

1 patches vignettes autocollantes



1 pen - crayon de travail et son taille-crayon



1 gel - gel pour flashage



1 mask - lunettes de protection



1 suivi de dépilation



1 manuel d'utilisation



1 cordon secteur.



ATTENTION : VOUS DEVEZ CONSERVER L'ENSEMBLE DES ELEMENTS D'EMBALLAGE D'ORIGINE (CARTONS, CALAGES, ETC.)

La garantie constructeur de 2 ans, pièces et main d'œuvre, sera exclusivement valable si l'appareil est retourné dans l'ensemble de ses éléments d'emballage d'origine. Vous devez donc conserver précieusement l'ensemble des éléments emballages d'origine dans lesquels votre EOne vous a été livré.



RAPPEL : Seule E-Swin est habilitée à commercialiser le EOne et ses accessoires : optic, clean, patches, pen, gel, mask, fun, etc. sur son site store.esw-beauty.com

AVERTISSEMENT : L'utilisation du EOne est restreint à un usage domestique exclusivement familial et ne doit pas servir à des fins professionnelles.

Toute garantie constructeur sera perdue dès lors qu'une utilisation professionnelle ou une consommation anormalement élevée de cassettes optic aura été mise en œuvre. Un EOne qui aura perdu sa garantie ne pourra pas la retrouver par la suite.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

I POUR VOTRE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser votre **E•One**, lire attentivement les informations suivantes :

- Tension de fonctionnement : 100 - 240 V~.
- Fréquence nominale : 50-60 hz.
- Puissance maximale consommée : 240 VA
- Vérifier que cette tension correspond à celle de votre installation. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.
- Vérifier que la prise de courant à laquelle est branché votre **E•One** est non endommagée, en parfait état de fonctionnement et qu'elle ne fait pas obstacle à la bonne utilisation de votre **E•One** (la prise de courant doit être facilement accessible).
- Cet appareil est réservé à un usage domestique et personnel seulement et non à des fins professionnelles.
- Ne pas débrancher en tirant sur le cordon del'**E•One**.
- Ne jamais utiliser l'**E•One** avec les mains mouillées.
- **L'E•One ne doit pas être utilisé sous la douche, dans le bain ou en tout lieu qui pourrait occasionner une projection d'eau sur l'appareil (applicateur ou base).**
- Ne jamais immerger la base del'**E•One**, son applicateur, et la cassette **optic** dans l'eau.
- Ne jamais utiliser l'**E•One** s'il est endommagé, ni en cas d'anomalie de fonctionnement apparaissant sur l'écran tactile, ni après une chute (des dommages non visibles peuvent être préjudiciables à votre sécurité).
- Cet appareil n'est réparable qu'à l'aide d'outils spéciaux. Pour un éventuel problème d'après-vente, contactez-nous sur notre site Internet **www.esw-beauty.com**.
- Les cassettes **optic** et, plus généralement, tous les accessoires devront être commandés uniquement via notre site Internet **store.esw-beauty.com**. Nous déclinons toute responsabilité quant à l'utilisation de cassettes de consommable et accessoires émanant d'un autre fabricant.

- Lors de l'utilisation de l'appareil, veiller à le poser sur un support plat et dans un lieu propice à éviter les risques de chutes de l'appareil.
- E-SWIN SAS décline toute responsabilité pour d'éventuels dommages résultant d'une mauvaise utilisation de l'appareil ou d'un usage autre que celui prévu dans le présent manuel d'utilisation.
- **Une paire de lunettes (mask) vous est fournie avec l'appareil. Il est conseillé de les porter durant toute l'utilisation de l'appareil. Si d'autres personnes sont proches de vous pendant l'utilisation de l'E•One, elles devraient aussi porter les mask.**
- **Lorsque l'E•One est en marche, il ne doit pas entrer en contact avec les cheveux, la région péri-oculaire délimitée par les lunettes mask (par exemple, les sourcils et les cils sont exclus d'une dépilation avec l'E•One), les vêtements ou tout autre objet, afin d'éviter tout risque de blessure, de blocage ou de détérioration.**
- L'embout de l'applicateur ne doit pas toucher les **mask** au moment du flash.
- **Ne jamais utiliser à proximité d'un aérosol, à proximité d'une source de chaleur, ni à proximité d'autres appareils électroniques.**
- **Ne pas empiler sur d'autres appareils électroniques.**
- Votre **E•One** est fourni avec un cordon secteur (longueur de 2 mètres) et un cordon applicateur (longueur de 2 mètres). Ne pas utiliser de rallonge ou tout autre câble que celui fourni par E-Swin SAS, sous risque de rendre l'équipement non conforme d'un point de vue électromagnétique.
- Les équipements de communication sans fil doivent être tenus à distance (environ 3 mètres) car ils sont susceptibles de perturber le bon fonctionnement de l'appareil.
- L'appareil doit être installé dans un environnement peu pollué par des perturbations électromagnétiques (ordinateur, appareils de soin électriques...).

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

I NE PAS UTILISER L'E•One

- Si vous êtes enceinte ou diabétique.
- Pour traiter les poils blancs ou roux. Plus précisément, certaines personnes sont nées de phototype I roux (type « poils de carotte »). À l'âge adulte, ces personnes ont pu s'éloigner de cette couleur fondamentalement orange. Néanmoins, la structure de la mélanine de ces poils garde les caractéristiques qui rendent inefficaces les technologies de lumière pour la dépilation.
- Sur les peaux très mates ou noires.
- Sur une peau blessée, brûlée, ou infectée.
- **Sur une peau ayant subi un coup de soleil dont la guérison date de moins d'un mois.**
- Sur les lésions cutanées d'aspect inhabituel, vous devez au préalable consulter votre médecin traitant.
- Sur les zones à risque (taches, marques de naissance, verrues, plaies non cicatrisées...).
- Sur les grains de beauté : s'ils sont localisés sur la zone à dépiler, ils devront être préalablement cachés, par exemple en les recouvrant à l'aide des pastilles autocollantes **patches** fournies avec l'E•One.
- Sur les zones tatouées : tatouage de maquillage (par exemple, contour des lèvres) ou tatouage esthétique, quelle qu'en soit la couleur. Utiliser alors la plaque de délimitation **stop** fournie avec votre E•One.
- Si vous souffrez d'affections cutanées (eczéma, inflammations, acné ...).

I NE JAMAIS LAISSER À LA PORTÉE DES ENFANTS

- Toute utilisation de l'E•One sur une personne mineure doit être réalisée sous la responsabilité d'un adulte.
- Ranger systématiquement l'E•One après chaque utilisation, hors d'atteinte des enfants. Notamment, débrancher le cordon secteur, le ranger dans son sachet initial, et enrouler le câble applicateur autour des supports câbles applicateur prévus à cet effet.

- Si vous êtes sous traitement photo-sensibilisant (demandez conseil à votre médecin).
- En cas d'antécédent pathologique cutané, un avis médical devra être demandé avant l'utilisation de l'E•One.
- Ne pas utiliser sur les animaux.

I PRÉCAUTION CONCERNANT LES UV

UV ARTIFICIELS EN INSTITUTS

Il convient de rester prudent lors d'une utilisation non raisonnée des UV artificiels. Concernant plus particulièrement les UV hautes pressions dispensés par des machines de forte puissance, il est recommandé de laisser un délai de quelques jours avant ou après une telle séance avant d'utiliser l'E•One.

UV NATURELS

Lors d'une exposition au soleil après une séance de flashage avec l'E•One, il est impératif d'appliquer une protection solaire de très haut indice sur les zones flashées durant les 2 semaines qui suivent la séance.

I AUTOBRONZANT

Ne pas utiliser l'E•One si un autobronzant a été appliqué sur la zone à épiler ; attendre la disparition complète des effets de l'autobronzant avant d'utiliser l'E•One.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

I EFFETS SECONDAIRES EVENTUELS AVEC L'E►One

Dans le cadre d'une utilisation conforme, les risques d'effets indésirables, telles rougeurs de la peau ou brûlures, sont extrêmement réduits mais existent néanmoins. Si ces effets surviennent, il convient de stopper immédiatement l'utilisation de l'appareil.

Une solution simple consiste à tester l'appareil sur une petite zone de peau la veille de la séance complète. L'absence de réaction cutanée permettra une utilisation parfaitement sécurisée de l'appareil.

Lorsque votre dépilateur E►One est utilisé conformément aux instructions, les effets secondaires et les complications sont rares. Cependant, tous les traitements cosmétiques, même ceux conçus pour une utilisation à domicile, comportent certains risques. C'est la raison pour laquelle il est important de comprendre et d'accepter ces risques et les complications éventuelles lorsque vous utilisez un système de dépilation à la lumière pulsée pour un usage domestique.

I PÉRIMÈTRE D'UTILISATION DE L'E►One

Le dispositif E►One est conçu et fabriqué par E-Swin (France).

Ce dispositif est un produit de santé de classe IIa réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE 0197.

L'E►One peut être utilisé dans les cas suivants :


- Pour la dépilation en lien avec un hirsutisme hormonal ou idiopathique.
- Traitement de dépilation dans un cadre purement esthétique sur toutes les zones du corps hors région péri-oculaire.



LA BASE



L'APPLICATEUR

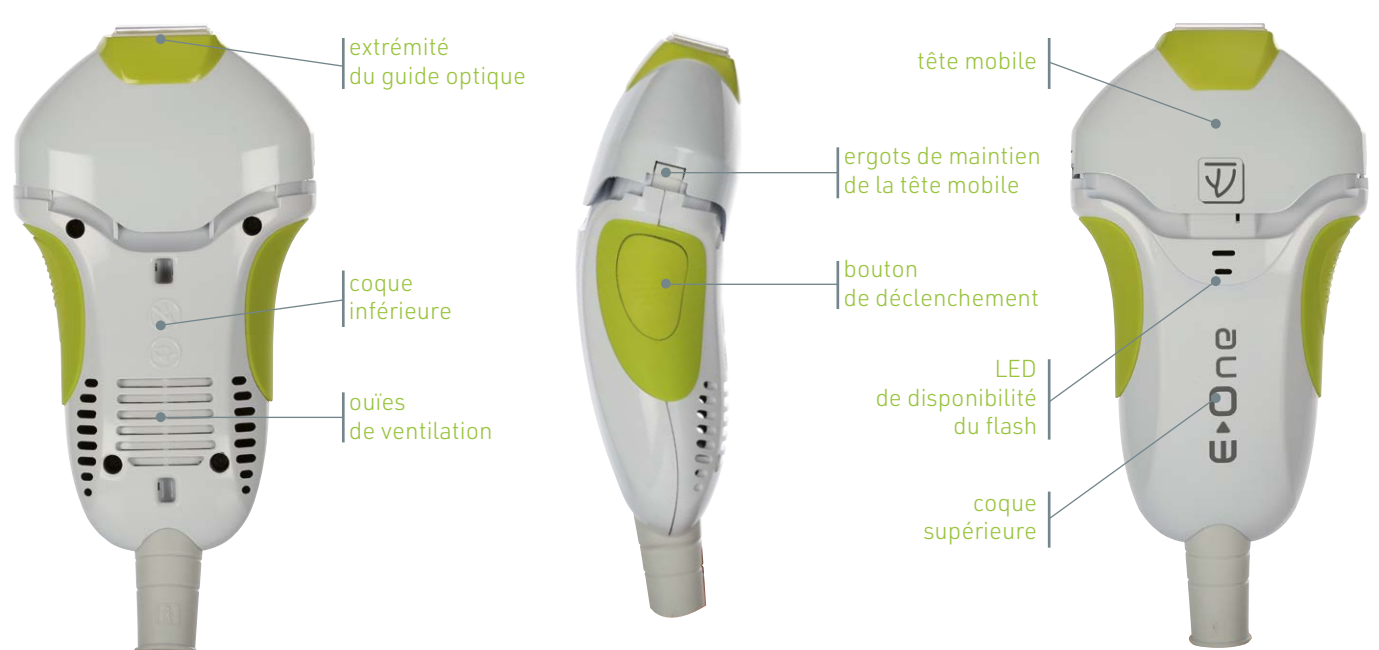

INFORMATIONS FOURNIES PAR L'ÉCRAN TACTILE DE L'E•One

MARCHE / ARRÊT DU DISPOSITIF

- 1 Bouton marche / arrêt.

ZONE DES ICÔNES DE PRÉCAUTIONS

- 2 Projection d'eau sur toutes les parties de l'appareil strictement interdite.
- 3 L'E•One ne doit pas être utilisé dans certains contextes physiologiques ou médicamenteux (femme enceinte, médicaments photosensibilisants...).
- 4 Obligation de lire le présent manuel avant toute utilisation de l'E•One.
- 5 Les lunettes de protection (mask) doivent être portées.

PROGRAMMER UNE DÉPILATION

- 6 Silhouette femme / homme. Cette zone permet de choisir entre « femme » ou « homme ».
- 7 Épaisseur du poil. Cette zone permet de sélectionner l'épaisseur du poil, du plus fin (en bas) au plus épais (en haut).
- 8 Couleur de la peau. Cette zone permet de sélectionner la couleur de peau, de la plus claire (en bas) à la plus foncée (en haut).
- 9 Niveau de puissance. La jauge représente les 6 niveaux de puissance du flash émis. Les flèches qui jouxtent cette jauge permettent d'augmenter ou de diminuer le niveau de puissance.
- 10 Pause. Cette icône est affichée sur l'écran tactile lors du déroulement de la séance de dépilation. Appuyer dessus permet de placer l'appareil en mode pause.
- 11 Play. Permet d'annuler le mode pause et de reprendre la séance de dépilation.

LA BASE DE L'E•One EST ÉQUIPÉE D'UN ÉCRAN TACTILE



ZONE DE NAVIGATION

- 12 Ces boutons permettent de circuler d'un caractère à un autre (22), et d'augmenter ou de diminuer les chiffres de chaque caractère.
- 13 Retour au menu précédent. Cette icône permet de modifier toute sélection effectuée préalablement. Elle est disponible lorsque les icônes 16 et 20 ont été sélectionnées.
- 14 Validation de la saisie des caractères (22).

INFORMATIONS EN TEMPS RÉEL

- 15 Activation / désactivation du volume.
- 16 Verrouillage / déverrouillage. Cette icône permet de sécuriser l'E•One par un code PIN.
- 17 Avertissement. Un numéro s'affiche sur l'écran tactile lorsque cette icône est active ; il correspond à un message d'erreur (cf p. 52).
- 18 Détection de la carte d'activation.
- 19 Température de l'applicateur. Cette icône n'est pas active lors du fonctionnement normal de l'appareil. Quand elle clignote, se référer au message d'erreur correspondant (p. 52).
- 20 Tube de la cassette. Son clignotement signifie qu'il est possible de flasher. Cliquer sur cette icône permet de saisir les 2 codes successifs d'activation d'une nouvelle cassette (ne concerne pas cette version du E•One).
- 21 Les chiffres 1 et 2 correspondent aux 2 codes d'activation successifs à saisir au moment du changement de la cassette optic (ne concerne pas cette version du E•One).
- 22 L'ensemble de ces caractères permet de saisir les codes d'activation cassette, le code PIN de sécurisation de l'E•One, et aussi d'afficher à tout instant le nombre de flashes restants.



I AVANT CHAQUE UTILISATION

VÉRIFICATIONS

- **Vérification du cordon secteur (non pincé ou écrasé, aucun fil dénudé).**
- **Vérification du câble reliant la base à l'applicateur (sans aucune détérioration visible).**
- **Vérification des parties optiques externes de l'EOne.**
Vérifier que l'extrémité en verre de l'applicateur (guide optique) est intacte, et si ce n'est pas le cas (guide optique fendu ou ébréché), un changement de l'intégralité de la tête mobile est nécessaire. La commande de cette partie est réalisée sur le site store.esw-beauty.com.
- **Vérification des parties optiques internes.**
 - Dans tous les cas, **avant** de procéder au démontage de la tête mobile, **l'appareil devra être débranché.**
 - Avant chaque utilisation, et avant de brancher l'EOne, vérifier l'intégrité des parties optiques internes : tube, filtre (pièce plate en verre coloré rouge), guide optique. Le filtre doit être nettoyé systématiquement, avant chaque séance de dépilation avec l'EOne. Il doit être propre et sans poussière.

Pour procéder à cette vérification :

- Appuyer simultanément sur les 2 ergots de maintien de la tête mobile, et la retirer (1).
- Poser délicatement la tête mobile sur une surface plane.



- **Extraction de la cassette optic avec filtre.**
 - Une fois la tête mobile ôtée, la cassette **optic** avec filtre se présente dans l'applicateur (2).
 - Oter la cassette de son applicateur : pincer fort le support filtre (3) et tirer (4). La cassette **optic** filtre se présente alors (5) ; il est impératif de la maintenir uniquement par les parties plastique.

À NOTER : Ne pas extraire la cassette **optic** avant chaque utilisations.


- **Nettoyage des parties optiques internes.**
 - Une fois la cassette filtre enlevée, le verre optique transparent est accessible également (6).
 - Se munir du spray **clean** : le vaporiser préalablement sur un chiffon non pelucheux (7).

À NOTER : Ne jamais vaporiser directement le spray sur les parties optiques.

- Nettoyer alors **uniquement** la face accessible du filtre avec le chiffon ainsi préparé (8). Répéter la même opération pour la face accessible du verre optique (9).

À NOTER : Le filtre ne doit jamais être séparé de sa cassette **optic**.

- Une fois le nettoyage terminé, se munir de la cassette **optic** et l'aligner avec l'applicateur grâce aux pastilles rouges (10). La pousser dans les glissières de l'applicateur en appuyant (11), de manière à s'assurer qu'elle est correctement maintenue (12).
- Réenclencher la partie mobile de l'applicateur en appuyant simultanément sur les ergots de maintien de la tête mobile (13) en veillant à aligner la pastille rouge interne de la tête avec la pastille de l'applicateur.

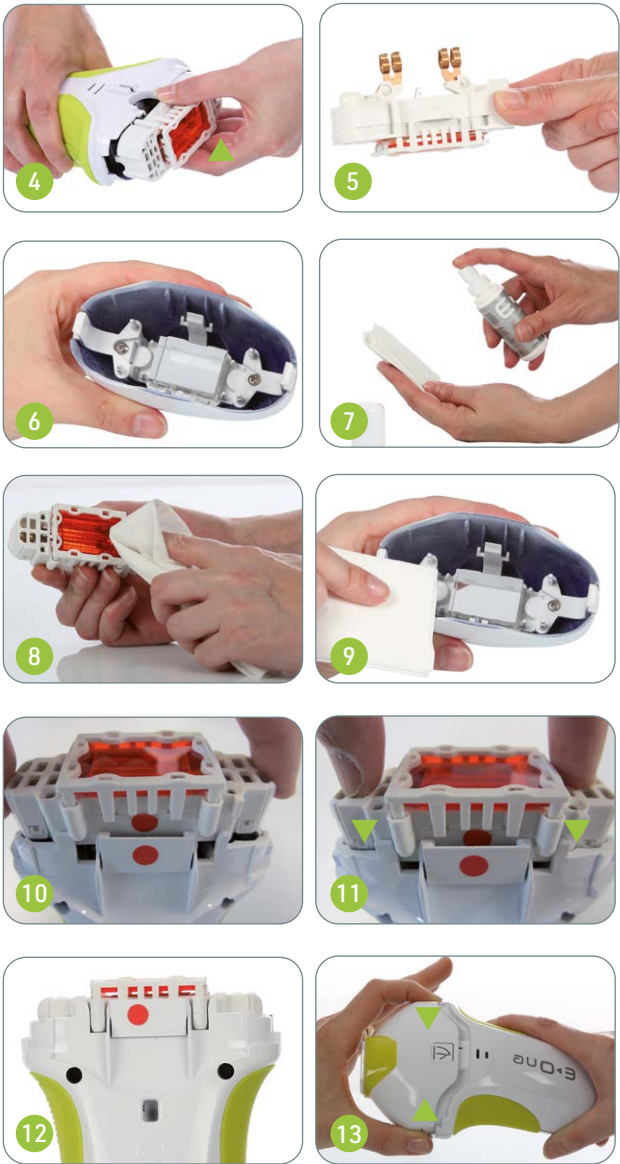

À NOTER : Pour une meilleur efficacité de l'EOne, il est recommandé de nettoyer le filtre avant chaque utilisation avec le spray **clean** fourni lors de l'achat de l'EOne. Tout filtre endommagé suite à un défaut de respect de la procédure d'utilisation ne sera pas couvert par la garantie constructeur.



Si vous intervenez après un fonctionnement de l'appareil, avant de l'éteindre et de le débrancher, attendre l'arrêt du ventilateur situé dans l'applicateur (cela peut prendre plus de 10 minutes). Cette procédure permet de refroidir les parties optiques internes. **Les autres ventilateurs, situés dans la base de l'EOneclinic, ne s'arrêtent que lorsque l'appareil est débranché.**

I ÉTAPE 1

DÉTERMINER LE MEILLEUR MOMENT POUR UTILISER L'É▶One

Si votre méthode d'épilation était :

- **Le rasoir :**
Vous pouvez vous dépiler avec l'É▶One.
- **Les crèmes dépilatoires :**
Vous ne pourrez vous dépiler avec l'É▶One qu'après 1 semaine suivant votre dernière épilation.
- **Les cires, l'épilateur électrique, la pince à épiler :**
Vous ne pourrez vous dépiler avec l'É▶One qu'après 3 semaines suivant votre dernière épilation.
- **La technologie laser ou lampe flash, autres méthodes :**
Vous ne pourrez vous dépiler avec l'É▶One qu'après la repousse entamée.

I ÉTAPE 2

PRÉPARER SA PEAU

- Votre peau doit être propre, sèche et débarrassée de tout produit cosmétique.
- N'appliquez ni crème, ni lait hydratant, ni huile, ni aucune autre substance sur votre peau.
- Raser la zone à flasher le **jour même** de la séance avec l'É▶One.

À NOTER : Il est impératif que les zones de la peau à flasher soient totalement débarrassées de tous poils par rasage (et surtout pas par épilation à la cire, à la crème, à l'épilateur électrique ou par tout autre procédé qui arracherait le poil). Le rasage doit être réalisé de préférence sur une peau humide afin de réduire l'effet agressif du rasoir.

- Rincer votre peau à l'eau. Après le rasage, la peau doit être parfaitement rincée pour éliminer tous les poils coupés.

I UTILISATION DE LA CARTE D'ACTIVATION

Ces appareils fonctionnent avec une carte d'activation, créditée de 3000 flashes. Cette carte est spécifique de la cassette **optic** avec laquelle elle a été commandée.

- Munissez-vous de la carte d'activation de votre cassette **optic**,
- Insérez cette carte sur le clip de maintien supérieur situé dans le socle de l'applicateur.
- Laissez cette carte ainsi placée et ce, tout au long de la séance de dépilation.
- À la fin de la séance, ôtez la carte d'activation en prenant soin de ne pas l'abîmer, et la ranger dans son étui.
- Suivez la procédure d'extinction de l'appareil.



SE DÉPILER AVEC L'ÉOne

I ÉTAPE 3

MISE EN ROUTE ET PARAMÉTRAGE DE L'ÉOne


RAPPELS :
Les définitions des icônes sont indiquées en pages 14 et 15.
Lors de la première utilisation, votre ÉOne est déjà équipé d'une cassette **optic**.

• **Brancher l'ÉOne avec son cordon secteur**
L'ÉOne émet 3 bips, l'écran est noir (écran **A**).
Il suffit d'appuyer sur **n'importe quelle zone de l'écran** pour que toutes les icônes apparaissent (écran **B**). Ces icones sont présentées en pages 14 et 15. L'affichage de tous les menus est temporaire. Seules les icônes de précaution clignotent.

• **Déverrouiller les précautions de sécurité** (écran **C**).
Il est obligatoire de valider chaque sécurité en appuyant sur chacune d'entre elles, une par une (l'ordre de validation n'a pas d'importance).

Une fois toutes les icônes de précautions validées, toutes les autres icônes de paramétrage du flash sont disponibles.

Tant qu'une icône de précaution n'a pas été validée, elle continuera à clignoter. L'ÉOne ne pourra pas être paramétré, ni utilisé, tant que l'ensemble de ses sécurités n'aura pas été déverrouillé.

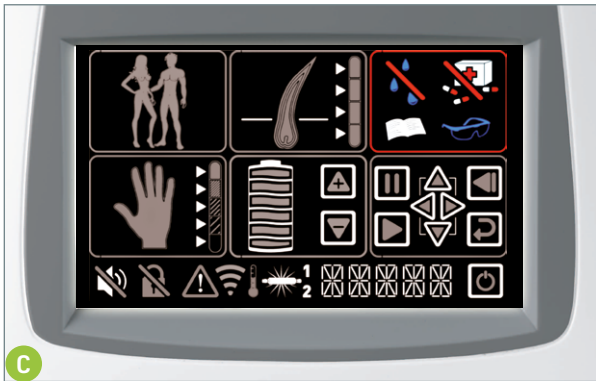


• **Paramétrer sa dépilation**
Il suffit de renseigner chacun des icônes clignotantes pour paramétrer sa dépilation. La sélection de chacun d'entre eux ne nécessite pas d'appuyer sur l'icône de validation (**14**). Tous les paramètres doivent avoir été sélectionnés pour pouvoir utiliser l'ÉOne. Si l'un d'entre eux ne l'était pas, l'icône conce née continuerait à clignoter.

- **DÉTERMINER VOTRE SILHOUETTE (écran D)**
Choisir la silhouette femme / homme, en cliquant en alternance sur l'encadré (**6**). La silhouette sélectionnée reste à l'écran : l'autre silhouette disparaît.

- **DÉTERMINER L'ÉPAISSEUR DES POILS À DÉPILER (écran E)**
Choisir l'épaisseur du poil (**7**), parmi les 4 épaisseurs de poil proposées, du **plus fin (en bas)** au **plus épais (en haut)**.

- **DÉTERMINER LA COULEUR DE PEAU (écran F)**
Choisir la couleur de la peau (**8**), de la plus claire (**en bas**) à la plus foncée (**en haut**).

Les peaux très foncées et noires ne sont pas représentées car non compatibles avec l'ÉOne.

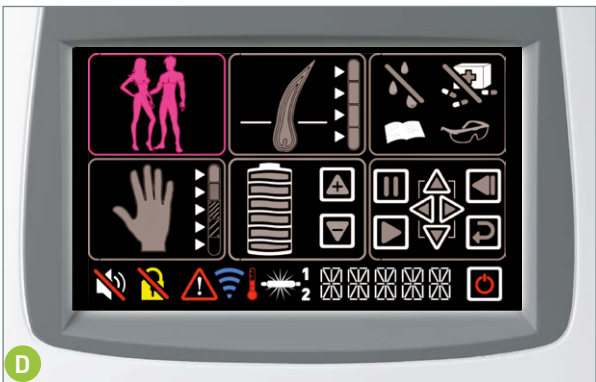

SE DÉPILER AVEC L'E•One

- RÉGLER LE NIVEAU DE PUISSANCE SOUHAITÉE (écran G)


Les flèches présentes à côté de l'icône de niveau de puissance (9) permettent d'augmenter ou de diminuer la puissance du flash émis.

Cliquer sur une des deux flèches bleues, jusqu'à atteindre progressivement la puissance désirée.

Quand le dernier paramètre est validé, l'icône de mise en pause (10) dans la zone de navigation devient visible.

L'icône représentant la lampe (20) clignote ; l'appareil est prêt à flasher.

À tout moment, il est possible de modifier un de ces paramètres ; il suffit de cliquer sur l'icône correspondante et de modifier le paramétrage.

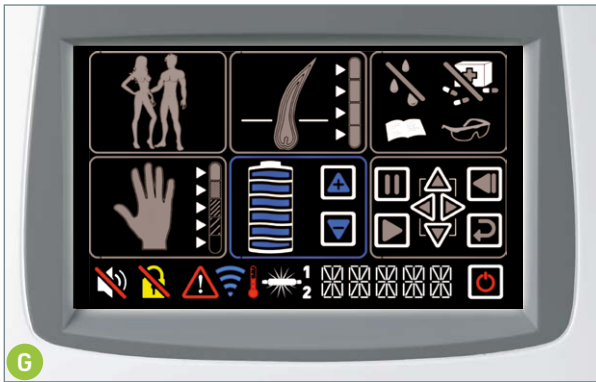

I CAS PRATIQUES

ÉCRAN H

« Je suis un homme, j'ai une peau claire, je souhaite dépiler mes aisselles. »

Mes sélections seront les suivantes :

- . homme
- . peau claire (1^{ère} couleur)
- . poil le plus épais (4^e épaisseur)
- . jauge de niveau de puissance (1^{er} niveau)



ÉCRAN I

« Je suis une femme, j'ai une peau mate, je souhaite dépiler mes bras. »

Mes sélections seront les suivantes :

- . femme
- . peau la plus foncée (5^e couleur)
- . poil (2^e épaisseur)
- . jauge de niveau de puissance (1^{er} niveau)



À NOTER : Par défaut, le niveau de puissance proposé est réglé à sa valeur de base. Cette valeur permet d'obtenir une bonne qualité de résultats chez la plupart des utilisateurs, avec une sécurité optimale dans 100 % des cas. Augmenter le niveau de puissance de l'E•One va avoir les conséquences suivantes :

- augmentation des résultats obtenus
- diminution du nombre de séances nécessaires pour l'obtention d'un résultat durable
- augmentation du ressenti sur la peau au moment du flash
- augmentation du risque de rougeurs, voire de brûlures sur des peaux très pigmentées (mates) après une séance

EN PRATIQUE : Commencer toujours par un essai au réglage de base (le réglage par défaut proposé par l'E•One) puis augmenter progressivement par palier de 1 valeur le niveau de puissance souhaitée. Réaliser un flash puis attendre 5 minutes après ce flash pour apprécier la réaction cutanée. En l'absence de réaction cutanée, vous pouvez alors flasher l'ensemble de la zone souhaitée ou augmenter à nouveau de 1 palier et ré-observer la réaction produite (et ainsi de suite).




IMPORTANT : Plus la peau flashée est de couleur foncée (que ce soit par nature, ou suite au bronzage), plus il faut rester proche du réglage du niveau de puissance proposé par défaut.

I ÉTAPE 4

DELIMITATION DE LA ZONE A FLASHER

- Délimiter la zone à flasher à l'aide du **pen**, en traçant des bandes blanches parallèles sur les grandes zones.
- Si nécessaire, utiliser le **stop** pour masquer une zone assez grande à ne pas flasher (tatouage...)
- Masquer les petites zones à ne pas flasher (grains de beauté...) avec les **patches**.
- Après avoir appliqué le **gel** en couche épaisse sur l'ensemble de la zone à flasher, faire progresser l'applicateur le long de la zone délimitée (se référer à la page suivante pour la réalisation du flashage).
- Le positionnement de l'applicateur laisse une empreinte sur la peau, ce qui permet de visualiser la zone déjà traitée. Ainsi, d'un flash à un autre, il est très facilement possible de distinguer une zone déjà flashée d'une autre qui ne l'a pas encore été. Un recouvrement de 1 mm environ est possible.
- Appliquer le **gel** sur l'ensemble de la zone à flasher et en couche épaisse. Il ne doit **en aucun cas** pénétrer l'intérieur de la tête mobile.

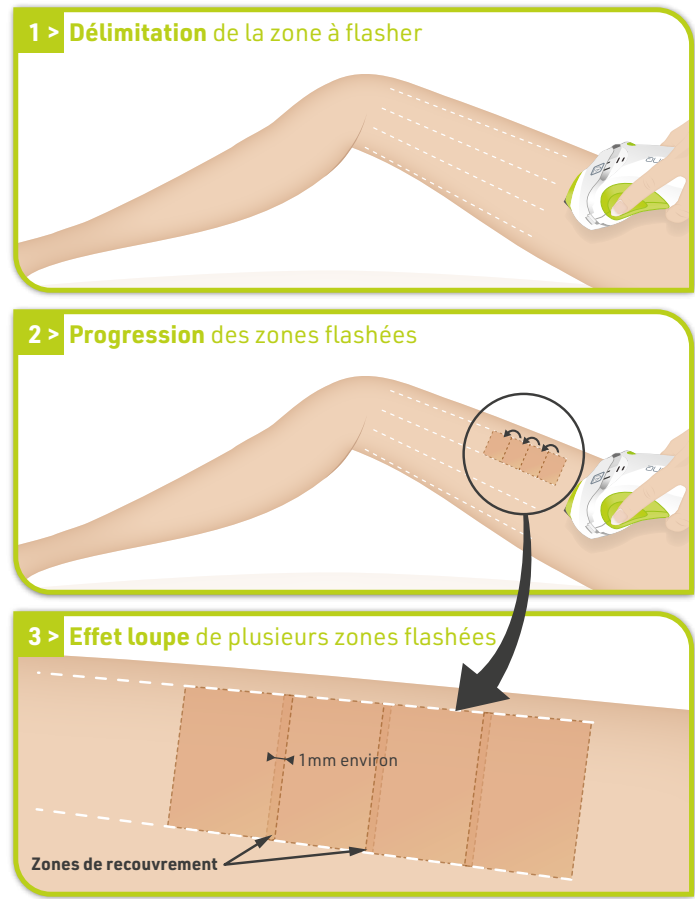

PRECAUTIONS A PRENDRE PENDANT LA SEANCE

- Il est conseillé de vous munir des lunettes (**mask**) et de les porter. Si d'autres personnes sont proches de vous pendant l'utilisation de l'É▶One, elles peuvent elles aussi porter les lunettes (**mask**).

IMPORTANT : Ne pas flasher la zone péri-oculaire (située sous les lunettes **mask** protégeant vos yeux, vos sourcils, vos cils...).

- Si vous entreprenez le flashage d'une grande zone, n'étalez pas le **gel** sur l'ensemble de la zone dès le début : il finirait par sécher et de fait perdrait son efficacité en matière de transmission optique. Etalez donc le **gel** au fur et à mesure de votre progression sur la zone concernée. Le **gel**, une fois utilisé sur la peau et flashé, ne doit être en aucun cas récupéré et réutilisé sur une autre zone : le flashage du **gel** est susceptible d'entraîner une modification de ses caractéristiques optiques.

RAPPEL : Le crayon de travail **pen**, le gel **gel**, les vignettes autocollantes **patches**, la plaque de délimitation **stop**, les lunettes **mask** à utiliser doivent être ceux fournis avec votre É▶One. **Toute utilisation d'un autre produit risque d'occasionner des brûlures cutanées et annulent la garantie de votre appareil.**




ASTUCE ! Pour enlever aisément l'applicateur de son socle, il faut le saisir au niveau du gros câble blanc. L'applicateur se décroche alors facilement.

SE DÉPILER AVEC L'E▶One

EMISSION DU FLASH

- Pour pouvoir flasher, l'extrémité en verre de l'applicateur (guide optique) doit être appliquée sur la peau. Ensuite, une pression doit être exercée de manière à « enclipser » la tête de l'applicateur.
- Le flash peut alors être déclenché en appuyant sur le bouton situé sur le côté de l'applicateur.
- La pression doit être relâchée et l'applicateur séparé de la peau.
- L'applicateur est ensuite déplacé sur la zone juste à côté. Il ne devra être réenclenché qu'après le passage de la LED du voyant au vert (si l'applicateur est réenclenché avant que la LED verte ne soit allumée, le flashage ne pourra être émis).
- Prendre soin de tendre la peau là où elle est la plus fine, afin que la partie en verre (guide optique) de l'extrémité de l'applicateur soit bien en contact avec la peau et que la zone flashée soit correctement dépilée.

REMARQUE : À chaque flash, la zone dépilée correspond à la plage couverte par l'extrémité du guide optique, soit $3 \times 2 = 6 \text{ cm}^2$. La surface en verre (guide optique) à l'extrémité de l'applicateur doit être positionnée bien à plat sur la peau.

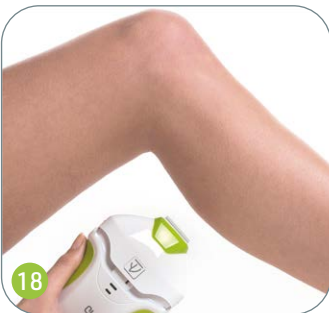

I ÉTAPE 5

FIN DE LA SÉANCE

- Appuyer sur la touche **1**.
- Une fois le ventilateur **situé dans l'applicateur** éteint (après 10 minutes environ), le cordon secteur peut être débranché **les autres ventilateurs, situés dans la base de l'E▶One ne s'arrêtent que lorsque l'appareil est débranché.**
- Nettoyer l'extrémité en verre de l'applicateur (guide optique) avec un chiffon humide.
- Finir de nettoyer le guide optique avec le spray **clean** (photos **20** et **21**).

Pour toute intervention après une utilisation de l'E▶One , il faut attendre l'arrêt complet des ventilateurs situés dans l'applicateur. Cela permet, entre autre, aux parties optiques d'être correctement refroidies. Les ventilateurs situés dans la base, quant à eux, ne s'arrêtent que lorsque l'appareil est débranché.

- Ranger l'E▶One .



Une fois le programme de dépilation initié, l'appareil se charge : des barres verticales défilent alors en bas de l'écran tactile, de droite à gauche (à l'emplacement de l'icône 22). Ce chargement intervient également après chaque flash émis et précède l'affichage du nombre de flash restants sur la cassette **optic.**
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant 15 minutes, il se place automatiquement en mode « Pause ».

À NOTER : Sans utilisation de l'appareil au bout de 10 minutes environ, l'appareil se met en économie d'énergie. Les ventilateurs situés dans l'applicateur s'arrêtent, contrairement à ceux situés dans la base : ces derniers ne s'arrêtent qu'au moment du débranchement de l'appareil. Il suffit de déclencher un flash pour réactiver ces derniers.

REMARQUES : Après la dépilation, de petits points rouges peuvent apparaître : c'est une réaction normale, ils disparaîtront rapidement. En cas de peau sensible, et après une dépilation avec l'E▶One ne pas utiliser de crème dépilatoire sur les zones flashées durant une semaine.



CHANGEMENT DE LA CASSETTE OPTIC

Cette étape doit être réalisée avec le maximum de précaution. Toute mauvaise manipulation peut entraîner **des dégâts irréversibles à l'applicateur et à l'E•One d'une manière plus générale. La garantie ne fonctionnera pas en cas de mauvaise manipulation. Nous vous recommandons de respecter scrupuleusement cette procédure.**

I ÉTAPE 1

La cassette est à changer lorsque le nombre de flashes affiché est égal à 0. Dans ce cas, l'icône de la lampe (20) s'affiche, mais ne clignote plus (écran J).

Vous pouvez surveiller votre consommation sur l'écran tactile à chaque instant.



I ÉTAPE 2

- Avant d'éteindre et de débrancher votre appareil, **attendre l'arrêt du ventilateur situé dans l'applicateur** (cela peut prendre plusieurs minutes). Cette procédure permet de refroidir les parties optiques internes de l'applicateur ; **les autres ventilateurs, situés dans la base de l'E•One, ne s'arrêtent que lorsque l'appareil est débranché.**


I ÉTAPE 3

- Éteindre l'appareil
- Débrancher le cordon secteur de l'appareil

I ÉTAPE 4

EXTRACTION DE LA CASSETTE OPTIC EN PLACE

- Saisir l'applicateur et appuyer simultanément sur les 2 ergots de maintien de la tête mobile (23), et la retirer.
- Une fois la tête mobile ôtée, la cassette **optic** avec filtre à changer se présente dans l'applicateur (24).
- Ôter cette cassette de son applicateur : pincer fort le support filtre (25) et tirer (26). La cassette **optic** filtre se présente alors (27) ; il est impératif de la maintenir uniquement par les parties plastique.

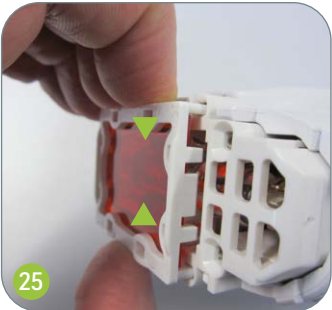


Le filtre ne doit jamais être séparé de sa cassette **optic.**

CHANGEMENT DE LA CASSETTE OPTIC

I ÉTAPE 5

RÉCEPTION DE LA NOUVELLE CARTOUCHE OPTIQUE ET DÉBALLAGE

Retirez la nouvelle cassette **optic** de la boîte en plastique (28 et 29).

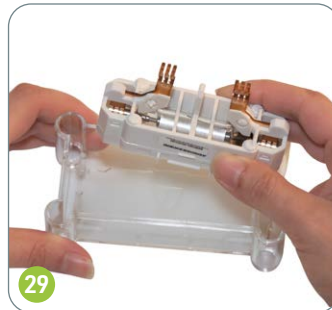

I ÉTAPE 6

INSERTION D'UNE NOUVELLE CASSETTE

- Se munir de la nouvelle cassette **optic** et vérifier le sens d'introduction de cette nouvelle cassette **optic**.

REMARQUE : Les cassettes ne sont pas symétriques, elles doivent donc être introduites dans un certain sens et surtout pas dans l'autre. Pour vous repérer, une pastille rouge indique le dessous de la cassette. Ce dernier doit être orienté pour correspondre au côté de l'applicateur doté d'une grille de ventilation, également repéré par une pastille rouge. Il s'agit donc de faire correspondre ces 2 pastilles rouges (30).

- La pousser dans les glissières de l'applicateur en appuyant de part et d'autre, de manière à s'assurer qu'elle est correctement maintenue (31).
- Après avoir enclenché la cassette, vous devez vérifier son bon positionnement : elle doit être alignée avec la partie fixe de l'applicateur (32).



Si ce n'est pas le cas (dépassement de plus de 2 mm), c'est que la cassette a été mal introduite : vous devez la ressortir et vérifier :

- La coïncidence des pastilles (33)
- Que vous n'avez pas tordu les électrodes (34)

Si vous avez tordu les électrodes, n'introduisez pas votre cassette **optic** dans votre **E•One** au risque de créer de graves dommages pour votre appareil. Vous devrez nous retourner la cassette endommagée et en commander une autre.



I ÉTAPE 7

NETTOYAGE DU FILTRE

Avant de repositionner la tête mobile de l'applicateur, nettoyer systématiquement le filtre (situé directement sur la cassette **optic**) avec le spray **clean** sur sa face **accessible uniquement**. **Il est strictement interdit de vaporiser directement le spray **clean** sur le filtre.** Il faut le vaporiser préalablement sur un chiffon propre et sec, puis utiliser le chiffon ainsi préparé pour nettoyer la surface accessible du filtre (35).



I ÉTAPE 8

RÉENCLENCHEMENT DE LA TÊTE MOBILE

Réenclencher la partie mobile de l'applicateur en appuyant simultanément sur les ergots de maintien de la tête mobile (36).


PRÉCAUTIONS : Durant l'ensemble de la procédure de changement de cassette, en aucun cas vous ne devez toucher les électrodes du tube (34). Si vous avez malencontreusement touché le tube ou son réflecteur, nous vous conseillons vivement de nous retourner votre cassette afin de procéder à un échange.

CHANGEMENT DE LA CASSETTE OPTIC

RENOI DE LA CASSETTE OPTIC USAGÉE (FRANCE MÉTROPOLITAINE UNIQUEMENT)

ÉTAPE 1

RÉCEPTION DE LA NOUVELLE CASSETTE ET DÉBALLAGE




Au moment de déballer la nouvelle cassette optic, il faut conserver tous les éléments qui vous permettront de renvoyer sans frais et en toute sécurité la cassette usagée (se référer à étape n°2 pour les détails).

Pour retirer la nouvelle cassette optic de son boîtier plastique, il faut préalablement casser les clips sécables qui maintiennent la cassette dans son boîtier.

Pour ce faire, une fois la boîte plastique ouverte (photo 37), il faut apposer chaque pouce sur les 2 clips et exercer une pression latérale vers l'extérieur du boîtier (photo 38) afin de rompre ces clips.

Vous pouvez alors retirer la nouvelle cassette optic de son boîtier.

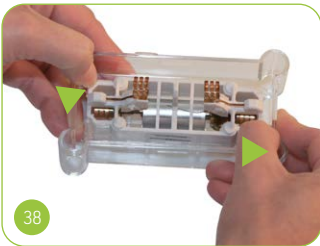

ÉTAPE 2

CONSERVATION DES ÉLÉMENTS AU MOMENT DE LA RÉCEPTION DE LA NOUVELLE CASSETTE

Lors de la réception de la nouvelle cassette optic, il faut conserver les éléments suivants :

- Le boîtier plastique transparent avec son couvercle.
- Les 2 mousses blanches de calage de la boîte cassette.
- Les 2 boîtes en carton :
 - La boîte optic
 - La boîte marron en carton renforcé

Vous avez également à votre disposition :

- Les 2 étiquettes de fermeture autocollantes (stickers).
- Le bon de retour prépayé.

ÉTAPE 3

EMBALLAGE DE LA CASSETTE USAGÉE



- Récupérer la cassette usagée et la placer dans le **boîtier plastique transparent** (photo 39), puis refermer à l'aide de son couvercle plastique (photo 40).
- Apposer **chacune des 2 étiquettes de fermeture** de part et d'autre des parois du boîtier, de manière à ce que chacune de ces étiquettes recouvre la jointure entre le boîtier et son couvercle (photo 41).
- Prendre les **2 mousses blanches de calage de la boîte cassette**, et les placer de part et d'autre du boîtier plastique, en le calant au maximum entre ces 2 mousses de calage.
- Placer le boîtier ainsi maintenu d'abord dans la boîte optic (photo 42).
- Placer ensuite la boîte carton optic à l'intérieur de la **boîte marron en carton renforcé** (photo 43).

ÉTAPE 4

PRÉPARATION À L'ENVOI

- Refermer la boîte marron ainsi préparée en prenant soin de la scotcher suffisamment de part et d'autre des rabats (photo 44).
- Coller le bon de retour prépayé sur la boîte carton marron (photo 45).

Votre colis est ainsi prêt à être expédié. Il vous suffit de le déposer dans n'importe quel bureau de poste.

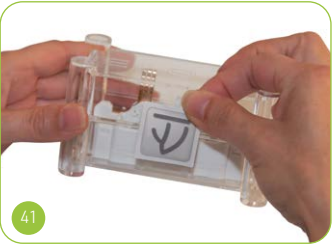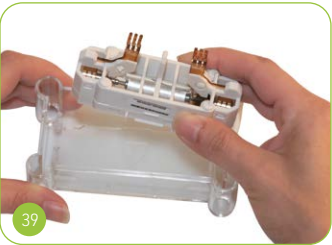



I OPTIONS DU LOGICIEL

CODE PIN

Il est possible de sécuriser votre **E•One** par l'entrée d'un code PIN. Tant qu'un code PIN spécifique n'a pas été saisi, une barre rouge apparaît sur l'icône de verrouillage (**16**). Cela signifie que l'appareil n'est pas verrouillé, il n'y a pas de code à saisir.

Par défaut, ce code PIN est 0000. Si vous n'intervenez pas sur ce code PIN, celui-ci ne vous est pas demandé au démarrage de l'appareil. Si, par contre, vous modifiez le code PIN par défaut (0000), à chaque remise en route de l'**E•One**, vous devrez introduire le nouveau code PIN.

- **Changer de code PIN :**
 - Cliquer sur l'icône de verrouillage (**16**). Le chiffre 1 à côté de l'icône de la lampe (**20**) clignote alors : la saisie du 1^{er} code est attendue.
 - Effectuer la saisie du code PIN (4 chiffres) à l'aide des icônes de navigation (**12**). Ces dernières permettent de modifier le chiffre de chaque segment (flèches verticales) et de se déplacer d'un segment à l'autre (flèches horizontales). Une fois les 4 chiffres du code saisis, les valider grâce à l'icône (**14**). Le chiffre 2 à côté de l'icône (**20**) clignote alors : la saisie du second code est attendue.
 - Effectuer une seconde saisie du code (saisie de confirmation), puis valider de nouveau (icône de validation **14**).

Quand la saisie est terminée, le retour au menu précédent se fait automatiquement.

En revanche, quand le second code saisi est différent du premier code, l'icône d'avertissement (**17**) clignote, et le message d'erreur n°13 s'affiche. Il faut appuyer sur l'icône de validation (**14**), et recommencer la saisie complète (saisie du code PIN, suivie de la saisie du même code PIN pour confirmation).

À chaque prochain démarrage de l'appareil, ce code PIN sera demandé en tout premier lieu. L'icône de déverrouillage (**16**) clignote (elle n'est plus barrée du trait rouge). Il faut saisir le code PIN (1 seule fois). Si le code est exact, les icônes de précautions apparaissent. Si le code est erroné, l'icône d'avertissement (**17**) clignote, et le message d'erreur n° 14 s'affiche.

- **Désactiver le code PIN :**

La désactivation du code PIN n'est possible qu'à partir du moment où l'**E•One** est déjà en marche, c'est-à-dire que le code PIN que vous souhaitez modifier a déjà été saisi au démarrage. Il suffit ensuite de cliquer une fois sur l'icône de déverrouillage (**16**), et saisir le code PIN 1 seule fois.

- **Modifier un code PIN existant :**

La modification d'un code PIN existant, alors qu'un ancien code existe déjà, est possible mais uniquement à partir du moment où l'**E•One** est déjà en marche, c'est-à-dire que le code PIN que vous souhaitez modifier a déjà été saisi au démarrage. Il faut alors cliquer 1 fois sur l'icône de verrouillage (**16**) et saisir 1 fois le code actuel, puis le valider (icône de validation **14**). L'appareil est déverrouillé ; la barre oblique rouge apparaît sur l'icône de verrouillage (**16**). Il est possible alors de saisir un tout nouveau code PIN en effectuant les mêmes étapes que celles décrites précédemment.

Si l'icône de verrouillage (**16**) a été sélectionnée par erreur, alors que vous ne souhaitez pas saisir de code PIN personnalisé, il faut cliquer sur l'icône de retour (**13**).

IMPORTANT : Si vous avez saisi un code PIN dont vous ne vous souvenez pas, vous devrez nous retourner votre **E•One** afin que notre service technique puisse le débloquent. Ce service n'étant pas compris dans la garantie, il vous sera donc facturé.

BIP TOUCHES

Par défaut, le « Bip touches » est activé, il vous est possible de le désactiver. C'est pourquoi nous vous conseillons de choisir un code PIN simple à retenir, mais aussi de le noter par ailleurs.



LES GESTES INTERDITS

VOICI UNE LISTE DE GESTES INTERDITS SUR VOTRE **E•One** (NON EXHAUSTIVE)

Ces gestes sont interdits car ils vous mettent en danger ou risquent d'endommager votre appareil d'une manière irréversible.



Ne pas couvrir avec votre main ou de quelque manière que ce soit, la grille de ventilation située sur l'applicateur.



Ne pas couvrir la base de l'E•One avec un tissu pour ne pas obstruer la grille de ventilation située en partie haute.



Ne pas poser la base de l'E•One sur une surface non rigide (exemple, un lit) ce qui entraînerait une possible obstruction de la grille de ventilation basse.



Une fois la cassette **optic** démontée, ne toucher que les parties en plastique blanc et surtout pas les parties métalliques ou la lampe, ni les électrodes, ni le tube, ni le réflecteur.



Ne jamais chercher à démonter l'applicateur



Ne pas tenter d'ouvrir votre appareil **E•One** : Toute intervention doit être réalisée exclusivement par des personnes dûment habilitées par le fabricant.

À NOTER : Contrairement aux ventilateurs situés dans l'applicateur, les autres, situés dans la base de l'E•One, ne s'arrêtent que lorsque l'appareil est débranché.


UTILISATION DES ACCESSOIRES

Le **pen** sert à entourer la zone à dépiler. Le crayon de travail doit être utilisé avant l'application du **gel**.

REMARQUE IMPORTANTE : Seul ce crayon **pen** doit être utilisé pour marquer les zones à flasher. Il a été testé pour ne pas réagir aux flashes. Tout autre crayon risque d'entraîner des brûlures cutanées si le flash est émis sur le trait dessiné à même la peau.



Le **gel** doit être entreposé à température ambiante. Il est utilisé en couche épaisse et appliqué au fur et à mesure de l'avancement de la séance pour éviter qu'il ne sèche sur la peau. Le **gel**, une fois utilisé sur la peau et flashé, ne doit être en aucun cas récupéré et réutilisé sur une autre zone. Le reflashage du **gel** est susceptible d'entraîner une modification de ses caractéristiques optiques. Il est enlevé de la surface de la peau à la fin de la séance à l'aide d'une serviette humide ou sous la douche. Il est enlevé des parties optiques et de la tête mobile de l'applicateur à l'aide d'un chiffon légèrement humide puis du spray **clean**.

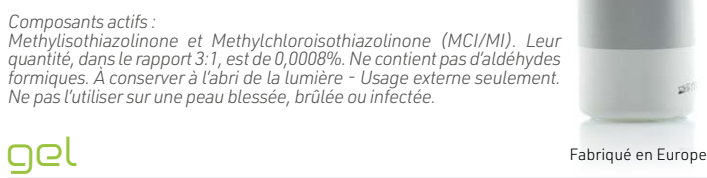

Composants actifs : Methylchloroisothiazolinone (MCI/MI). Leur quantité, dans le rapport 3:1, est de 0,0008%. Ne contient pas d'aldéhydes formiques. À conserver à l'abri de la lumière - Usage externe seulement. Ne pas l'utiliser sur une peau blessée, brûlée ou infectée.

gel

Il est conseillé de porter les lunettes **mask** par toutes les personnes présentes au moment des flashes. Elles permettent de délimiter la zone où il est **interdit** de flasher (exemple : cils, sourcils...).



mask

La cassette **optic** a une durée de vie pré-programmée garantissant une qualité constante de la lumière émise du premier au dernier flash disponible. Elle est livrée avec sa carte d'activation. La cassette **optic** et sa carte doivent être changées lorsque le nombre de flash arrive à expiration.



optic

Le spray **clean** sert à nettoyer et entretenir :

- Les parties optiques de la tête mobile de l'applicateur :
 - Parties optiques externes : pulvérisation directe puis essuyage à l'aide d'un chiffon sec en coton
 - Parties optiques internes : Ne **jamais** pulvériser directement sur les parties optiques internes. Prendre un chiffon sec et en coton, pulvériser le spray sur ce chiffon, puis nettoyer le filtre (pièce plate en verre coloré rouge) à l'aide de ce chiffon imprégné. Finir le nettoyage avec une partie sèche du chiffon.
- L'écran tactile de l'applicateur : Ne **jamais** pulvériser directement sur l'écran tactile. Prendre un chiffon sec et en coton, pulvériser le spray sur ce chiffon, puis nettoyer l'écran à l'aide de ce chiffon imprégné. Finir le nettoyage avec une partie sèche du chiffon.

Le spray ne doit être utilisé qu'une fois l'appareil débranché et lorsque les parties optiques sont froides. Si vous intervenez après une utilisation de l'**E•One**, vous devez attendre l'arrêt complet du ventilateur de l'applicateur avant de débrancher la base. Cela permet, entre autre, aux parties optiques d'être correctement refroidies.

clean




Les vignettes autocollantes **patches** (planche de 220 vignettes) servent à masquer les petites zones à ne pas flasher (exemples : grains de beauté). Elles doivent être positionnées après le rasage et avant l'application du **gel**. Il devient possible de flasher toute zone sans plus se soucier des grains de beauté. Les **patches** seront retirés à la fin de la séance.




patches

La plaque **stop** est réalisée dans un matériau résistant aux flashes. Elle permet de masquer une zone où le flashage n'est pas souhaité (exemple : tatouage). L'extrémité en verre de l'applicateur (guide optique) peut aussi être positionnée à cheval sur le **stop** et la peau.

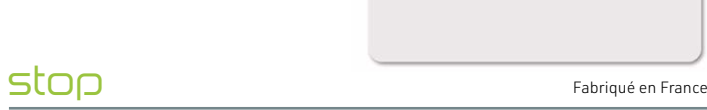

stop

Les pochoirs **fun** servent à délimiter des zones à ne pas flasher afin de conserver une pilosité localisée sous forme ludique. Ils sont à appliquer après rasage complet de la zone et application du **gel**. La présence du **gel** permet un certain maintien de ces pochoirs en place. Il est possible de flasher à cheval sur le bord de ces pochoirs de manière à avoir une délimitation nette des contours de la forme souhaitée.

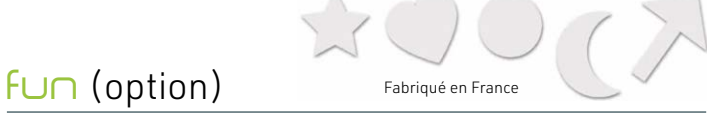

fun (option)

Vérifiez que votre **E•One** est bien débranché lorsque que vous procédez à son entretien.

Si vous intervenez après une utilisation de l'**E•One**, vous devez attendre l'arrêt complet du ventilateur de l'applicateur avant de débrancher la base. Cela permet, entre autre, aux parties optiques d'être correctement refroidies.

A NOTER : contrairement aux ventilateurs situés dans l'applicateur, les autres, situés dans la base de l' E•One , ne s'arrêtent que lorsque l'appareil est débranché.

I BASE

- **Parties plastiques**
Le nettoyage de l'ensemble des parties en plastique de l'**E•One** doit s'effectuer à l'aide d'un chiffon propre, préalablement humidifié à l'eau (sans aucun additif).
- **Écran tactile**
Le nettoyage de l'écran doit s'effectuer à l'aide d'un chiffon propre, préalablement imprégné du **clean** (ne jamais vaporiser le spray **clean** directement sur l'écran tactile).
- **Cordon secteur**
Vérifier son parfait état (non pincé ou écrasé, aucun fil dénudé). Le nettoyer avec un chiffon préalablement humidifié à l'eau (sans aucun additif).

I APPLICATEUR

- **Tête mobile**
Un nettoyage des parties optiques (internes et externes) de la tête mobile avec le spray **clean** avant et après chaque utilisation permet de conserver toute l'efficacité de votre **E•One**. **Ne jamais vaporiser directement le spray clean ni sur la cassette optic, ni son filtre.**
- **Corps de l'applicateur**
Le nettoyage de l'ensemble des parties en plastique de l'applicateur doit s'effectuer à l'aide d'un chiffon propre, préalablement humidifié à l'eau (sans aucun additif).

I CABLE BASE VERS APPLICATEUR

Ce câble doit toujours rester propre et sans aucune détérioration visible. Vous devez impérativement éviter de le plier fortement ou de le coincer. En cas de doute sur l'état de ce câble, vous devez absolument cesser toute utilisation de votre **E•One**.

I OUÏES D'AÉRATION DE LA BASE ET DE L'APPLICATEUR

L'applicateur et la base sont ventilés. Des grilles sont présentes à la fois sur l'applicateur dans sa partie inférieure et sur la base sur sa partie inférieure et arrière supérieure. Vous devez vérifier que ces grilles sont propres sans éléments susceptibles de les obstruer.

ATTENTION : Ne pas faire tomber de liquide dans la grille de ventilation située sur la coque inférieure.

I RANGEMENT

- Rangez votre **E•One** et ses accessoires dans sa boîte.
- Entrez votre **E•One** dans une pièce à température ambiante maximum de 25°C, hors de toute humidité excessive (exemple salle de bain) et non soumis à des vibrations (exemple : entreposé sur un lave linge).
- Si l'appareil subit un choc, il conviendra de vérifier l'intégrité des parties optiques.
- Tout dommage visible sur les parties optiques : filtre (pièce plate en verre coloré rouge), guide optique, tube, etc. doit amener à un arrêt immédiat d'utilisation de l'appareil.

RAPPEL : Température de stockage : - 5°C à + 65°C. Température d'utilisation : + 5°C à + 25°C. À utiliser et à stocker à une humidité relative inférieure à 93%.

ASSISTANCE

SERVICE TECHNIQUE

En cas de doute sur l'utilisation de l'appareil, contacter notre service technique.
Contacter notre service technique, rendez-vous notre site www.esw-beauty.com.

MESSAGE D'AVERTISSEMENT





















En plus de son propre numéro (voir tableau ci-dessous), chaque message d'erreur est signalé par le clignotement de l'icône d'avertissement (17).

Affichage écran	Signification	Que faire ?
01	Pas de flash détecté.	Contactez notre service technique, rendez-vous sur notre site www.esw-beauty.com .
02	L'appareil ne détecte pas de cassette optic .	Introduire la nouvelle cassette optic en respectant les consignes de manipulation et les consignes d'accès (code cassette optic).
03 04 05 08	Votre appareil est bloqué.	Débrancher l'appareil et le rebrancher (suivre les instructions en page 29). Si le problème persiste, contactez notre service technique, rendez-vous sur notre site www.esw-beauty.com .
06 (et clignotement de l'icône de température (19))	Blocage temporaire.	Attendre que cette procédure permettant de refroidir les parties optiques internes de l'applicateur soit terminée.
10 (et clignotement de l'icône de détection de carte d'activation (18))	Perte de connexion avec la carte d'activation.	Vérifier la présence et le bon fonctionnement de la carte d'activation. Il suffit de la reposer dessus (p.28).
13	Erreur de saisie du code PIN (à la mise en route, le code PIN saisi n'est pas identique au code PIN préalablement enregistré).	Suivre les consignes de saisie de code (p. 40 et 37).
14	Erreur de saisie du code PIN (les 2 saisies consécutives ne sont pas identiques).	Contactez notre service technique, rendez-vous sur notre site www.esw-beauty.com .



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MARQUAGE

 	Référence de l'appareil d'épilation  .
	Numéro de série unique de votre  .
 E-SWIN Rue des Côtes d'Orval ZA de la Prévôté 78550 Houdan FRANCE	Année de fabrication de votre appareil et adresse du fabricant.
 0197	Appareil médical répondant aux exigences de la Directive européenne 93/42, certifié par un organisme indépendant.
IP2X	Appareil protégé contre les corps étrangers solides de 12.5 mm de diamètre ou plus (classification IP).
	Logo correspondant à un degré de protection contre les chocs électriques pour les parties appliquées sur le patient (partie appliquée de type BF).
	Dispositif électrique de classe II.
	L'appareil doit être utilisé à l'intérieur.
	Conserver l'appareil au sec.
	Conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur.
	Obligation de se référer aux instructions du manuel d'utilisation.
100 - 240 V~ 50 - 60 Hz 240 VA	Conditions de fonctionnement (tension d'alimentation (courant alternatif), fréquence de la tension secteur, puissance).
	Avertissement, appareil tension dangereuse.
	Signe de sécurité général des dispositifs électromédicaux.
	Respecter les limites supérieure et inférieure de température indiquées de part et d'autre de ce logo.
	Ne pas utiliser le produit après la date indiquée sous ce symbole ().
	A côté de ce logo figure le numéro de lot du produit ( .

SPÉCIFICATIONS

Point d'impact, specifications	2 cm x 3 cm (6 cm²)
Vitesse	1 flash toutes les 3,8 à 6 secondes
Technologie	Lumière pulsée
Longueur d'onde	>580 - 1200 nm
Temps de charge/Source d'énergie	Fonctionnement continu
Dimensions (L x l x H)	510 x 290 x 510 mm
Poids	5,1 kg max
Dimensions avec emballage (L x l x H)	510 x 290 x 510 mm
Poids brut	8 kg max
Bruit	53 dBA max
Installation électrique requise	100 - 240 VAC
Consommation maximale	240 VA
Fréquence	50/60 Hz
Température	Fonctionnement +5 à +25°C Stockage -5 à -65°C
Humidité relative	30 - 93 %

RECYCLAGE ET TRAITEMENT



Instructions relatives au traitement des produits usagés : la Directive WEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)) 2020/96/CE a été mise en place afin d'assurer que les produits soient recyclés en utilisant les meilleures techniques possibles de traitement, de valorisation et de recyclage, et ainsi concourir à la protection de l'environnement et de la santé humaine.

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des composants et des matériaux de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés.

E SWIN SAS est affilié à un éco organisme qui se charge de la collecte et du traitement des produits en fin de vie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIRECTIVES ET DÉCLARATION DU FABRICANT


ÉMISSIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

L'**E•One** est prévu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il convient que l'utilisateur de l'**E•One** s'assure qu'il est utilisé dans un tel environnement.

Éssai d'émission	Conformité	Environnement électromagnétique - directives
Émissions RF CISPR 11	Groupe 1	L' E•One utilise de l'énergie RF uniquement pour ses fonctions internes. Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles et ne sont pas susceptibles de provoquer des interférences dans un appareil électronique voisin.
Émissions RF - CISPR 11	Classe B	L' E•One convient à l'utilisation dans tous les locaux, y compris dans les locaux domestiques et ceux directement liés au réseau public d'alimentation électrique, basse tension alimentant des bâtiments à usage domestique.
Émissions harmoniques - CEI 61000-3-2	Classe A	
Fluctuations de tension Papillotement flicker - CEI 61000-3-3	Conforme	

IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

L'**E•One** est prévu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-contre. Il convient que le client ou l'utilisateur de l'**E•One** s'assure qu'il est utilisé dans un tel environnement.

Essai d'immunité	Niveau d'essai selon la CEI 60601	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique directives
Décharges électrostatiques (DES). CEI 61000-4-2	± 6 kV au contact ± 8 kV dans l'air	± 6KV au contact ± 8kV dans l'air	Il convient que les sols soient en bois, en béton ou en carreaux de céramique. Si les sols sont recouverts de matériaux synthétiques, il convient que l'humidité relative soit d'au moins 30%.
Transitoires rapides en salves. CEI 61000-4-4	± 2 kV pour lignes d'alimentations électriques ± 1 kV pour lignes d'entrées / sorties	± 2KV pour lignes d'alimentations électriques. Non applicable.	Il convient que la qualité du réseau d'alimentation électronique soit celle d'un réseau public.
Surtension transitoire. CEI 61000-4-5	± 1 kV entre phases ± 2 kV entre phase et terre	± 1 kV en mode différentiel ± 2 kV en mode commun	Il convient que la qualité du réseau d'alimentation électronique soit celle d'un réseau public.
Creux de tension, coupures brèves et variations de tension sur les lignes d'entrée d'alimentation électrique. CEI 61000-4-11	< 5 % U _T (>95% creux de U _T) pendant 0,5 cycle. 40 % U _T (60% creux de U _T) pendant 5 cycles. 70 % U _T (30% creux de UT) pendant 25 cycles. < 5 % U _T (>95% creux de U _T) pendant 5 secondes.	< 5 % U _T (>95% creux de U _T) pendant 0,5 cycle. 40 % U _T (60% creux de U _T) pendant 5 cycles. 70 % U _T (30% creux de U _T) pendant 25 cycles. < 5 % U _T (>95% creux de U _T) pendant 5 secondes.	Il convient que la qualité du réseau d'alimentation électronique soit celle du réseau public. Si l'utilisateur de l' E•One exige le fonctionnement continu pendant les coupures de réseau d'alimentation électrique, il est recommandé d'alimenter l' E•One à partir d'une alimentation en énergie sans coupure ou d'une batterie.
Champ magnétique à la fréquence du réseau électrique (50/60Hz). CEI 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Il convient que les champs magnétiques à la fréquence du réseau électrique aient les niveaux caractéristiques de ceux d'un réseau public.
Perturbations RF conduites CEI 61000-4-6 Perturbations RF rayonnées CEI 61000-4-3	3Veff de 150Hz à 80MHz 3V/m de 80 MHz à 2,5 GHz	3Veff 3V/m	Il convient que les appareils portatifs et mobiles de communication RF ne soient plus utilisés plus près de toute partie de l' E•One , y compris les câbles, que la distance de séparation recommandée, calculée à partir de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur. Distance de séparation recommandée : d = 1,2 √P. d = 1,2 √P de 80MHz à 800 MHz. d = 2,3 √P de 800 MHz à 2,5 GHz. Où P est la caractéristique de puissance de sortie maximale de l'émetteur en watts (W), selon le fabricant de l'émetteur et d est la distance de séparation recommandée en mètres (m). Il convient que les intensités de champ des émetteurs RF fixes, déterminés par une investigation électromagnétique sur site ^a soient inférieures au niveau de conformité, dans chaque gamme de fréquences ^b . Des interférences peuvent se produire à proximité de l'appareil marqué du symbole suivant : 

IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (SUITE)

NOTE 1 : U_T est la tension du réseau alternatif avant l'application du niveau d'essai.

NOTE 2 : À 80MHz et à 800MHz, la gamme de fréquences la plus haute s'applique.

NOTE 3 : Ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et par les réflexions des structures, des objets et des personnes.

Les intensités de champ des émetteurs fixes, tels que les stations de base pour les radiotéléphones (cellulaire / sans fil) et les radios mobiles terrestres, la radio d'amateur, la radiodiffusion AM et FM, et la diffusion de TV, ne peuvent pas être prévues théoriquement avec exactitude. Pour évaluer l'environnement électromagnétique dû aux émetteurs RF fixes, il convient de considérer une investigation électromagnétique sur site. Si l'intensité du champ, mesurée à l'emplacement où l'**E•One** est utilisé, excède le niveau de conformité RF applicable ci-dessus, il convient d'observer l'**E•One** pour vérifier que le fonctionnement est normal. Si l'on observe des performances anormales, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, comme réorienter ou repositionner l'**E•One**.

b Sur la gamme des fréquences de 150 KHz à 80MHz, il convient que les intensités de champ soient inférieures à 3V/m.

DISTANCES DE SÉPARATION RECOMMANDÉES
ENTRE LES APPAREILS PORTATIFS ET MOBILES DE COMMUNICATION RF ET L'E•One

L'**E•One** est prévu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur de l'**E•One** peut contribuer à prévenir les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre l'appareil portatif et mobile de communications RF (émetteurs) et l'**E•One**, comme cela est recommandé ci-dessous, selon la puissance d'émission maximale de l'appareil de communications.

Puissance de sortie maximale assignée de l'émetteur - (W)	Distance de séparation selon la fréquence de l'émetteur (m)		
	de 150 Hz à 80 MHz (d = 1,2 √P)	de 80 MHz à 800 MHz (d = 1,2 √P)	de 800 MHz à 2,5 GHz (d = 2,3 √P)
0,01	0,12	0,12	0,24
0,1	0,37	0,37	0,74
1	1,20	1,20	2,24
10	3,70	3,70	7,40
100	12	12	24

Pour des émetteurs dont la puissance d'émission maximale assignée n'est pas donnée ci-dessus, la distance de séparation recommandée d en mètres (m) peut être estimée en utilisant l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P est la puissance d'émission maximale de l'émetteur en watts (W), selon le fabricant de ce dernier.

NOTE 1 : À 80 MHz et à 800 MHz, la distance de séparation pour la gamme de fréquences la plus haute s'applique.

NOTE 2 : Ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et par les réflexions des structures, des objets et des personnes.

CERTIFICATIONS

La société E-SWIN SAS fabricant exclusif de l'appareil **E•One** est certifiée ISO 13485.

CONFORMITÉ

Par la présente, E-SWIN SAS déclare que l'**E•One** est conforme aux exigences essentielles de la Directive 93/42/CEE, Annexe II, Article 3 et dispose du marquage CE sous la responsabilité de l'organisme TUV.

Il est ainsi conforme aux exigences des normes : EN 60601-1, EN 60601-1-2 et EN 60601-1-6 et EN 60601-1-11.

L'attestation CE est disponible sur le site www.e-swin.com.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Ne pas mettre ni la base, ni l'applicateur au contact de l'eau. Ne pas ouvrir, ni la base, ni l'applicateur car vous risqueriez de vous exposer à des tensions élevées. Ne jamais utiliser des cassettes **optic** et accessoires autres que ceux désignés et vendus pour l'**E•One** et par E-SWIN.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Veuillez vous conformer aux réglementations locales lorsque vous jetez les emballages, les consommables. Dans la mesure du possible, tentez de promouvoir le recyclage.

Votre appareil est garanti deux ans pour une utilisation domestique personnelle.

Toute erreur de branchement, toute erreur de manipulation, toute utilisation autre que pour la dépilation et d'une manière générale, toute utilisation en dehors des conditions décrites dans ce manuel annulent la garantie.

Tout accident qui surviendrait du fait d'une utilisation non conforme ou d'un non respect des prescriptions du présent manuel ou des différentes informations fournies au travers de l'étiquetage ou de l'écran tactile du ne saurait engager la responsabilité de la société E-SWIN SAS.

La garantie constructeur de deux ans, pièces et main d'œuvre, sera exclusivement valable si l'appareil est retourné dans l'ensemble de ses emballages d'origine.

Vous devez donc conserver précieusement tous les emballages dans lesquels votre E-One vous a été livré.



Pour toute question d'après-vente
ou des pièces détachées contactez:
commercial@esw-beauty.com
www.esw-beauty.com

ESWIN

ZA de la Prévôté
Rue des Côtes d'Orval
78550 Houdan
FRANCE
01 30 46 37 61



M009FR000D__ rev. D 22/07/2024



www.esw-beauty.com

CE 0197